

SNABBGUIDE FÖRINSTÄLLD PUMP OCH GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING

LYMPHA PRESS OPTIMAL PLUS



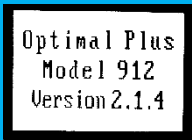
PUMP OCH KONTROLLPANEL:



PUMPENS KNAPPAR:

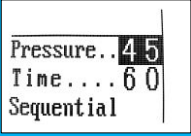



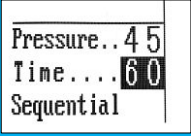



KNAPP	FUNKTION:
	Mode (programknapp): används för att välja tryck, tid, program, paustid och hålltid.
	Pilarna UPP och NED (Regleringsknappar): används för att justera tryck, tid, program, paustid och hålltid.
	START/STOPP: Används för att starta eller stoppa kompressionen.
	Select: (Valknapp) används för att bekräfta val eller ändringar av inställningar.

GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING VID FÖRINSTÄLLD PUMP:

SKÄRM	FUNKTION:
	<p>Strömkabeln kopplas in i pumpen och i ett lämpligt eluttag.</p> <p>Slå på pumpen på vänster sida. Knappen sätts i position I.</p> <p>Välkomstskärm: visar kortfattat modellnummer och version.</p>

SKÄRM	FUNKTION:
	<p>Tryck START på Start/Stopp. </p> <p>Kompressionen startar med det förinställda trycket, tid och program.</p> <p>Pumpen kan ALLTID stoppas. Tryck STOP på Start/Stopp. </p> <p>Trycket kan regleras på pumpen under användning med pilarna UPP och NED.  </p> <p>Skärmen visar alltid: inställt tryck, tid och program.</p> <p>Pumpen stannar när kompressionstiden har gått ut.</p>

INSTÄLLNING AV TRYCK OCH TID:

SKÄRM	FUNKTION:
	<p>Displayen visar det inställda trycket i luftkammare 1 - den luftkammare som ligger längst bort från hjärtat. I exemplet till vänster är trycket 45 mmHg.</p> <p>Pressure (Tryck) kan ändras när siffran bredvid Pressure är markerad. Om siffran bredvid Pressure inte är markerad – Tryck på Select  tills trycket är markerat.</p> <p>Trycket kan sedan ökas eller minskas med hjälp av pilarna UPP och NED.  </p>
	<p>Skärmen visar den inställda tiden. I exemplet till vänster är kompressionstiden 60 minuter.</p> <p>Den valda kompressionstiden kan ändras när siffran bredvid Time är markerad. Om siffran bredvid Time inte är markerad - Tryck på Selectj  tills tiden är markerad.</p> <p>Kompressionstiden kan sedan ökas eller minskas med hjälp av pilarna UPP och NED.  </p> <p>Kompressionstiden kan ställas in mellan 15 och 90 minuter. Kompressionstiden reduceras automatiskt under användning.</p> <p>Tilllägg av andra program (t.ex. för- och efterbehandling) ingår i den totala kompressionstiden.</p>