



Lympha Press[®]

Ödemet lindras och livskvalitén ökar!

SE



Lympha Press kompressionsutrustningar

*Ett oöverträffat, dynamiskt, intermittent,
pneumatiskt kompressionspumpssystem*

Pålitligt, effektivt och skonsamt.
Lympha Press ger en välgörande
kompressionsmassage med hjälp av individuellt
inställt program och lufttryck. Resultaten är
många, bl.a. ödemminskning och uppmjukning av
hud och fettvävnad.

Lympha Presssystemet är konstruerat för
att användas med individuellt utprovade
manschetter för armar, ben och kropp med

upp till 40 överlappande luftfickor. På Lympha
Presspumparna ställer man in tid och tryck på
Lympha Press Optimal finns även programval.
Pumparna har två uttag så att man kan behandla
hela underkroppen eller hela överkroppen
samtidigt.

Vid regelbunden användning av Lympha Press
lindras de kroniska symptomen, vilket möjliggör
funktionell förbättring. Detta underlättar vardagen
och ökar livskvaliteten för individen.

Lympha Press används på sjukhus och kliniker
och kan förskrivas som hjälpmedel i hemmet i din
hemregion. Reglerna är olika i olika regioner. .

Om Lympha Press kompressionsmanschetter


Manschetterna är så kallade multikammarmanschetter med upp till 40 överlappande luftkamarer. Manschetterna är gjorda av slitstark nylon och samtliga manschetter levereras med integrerade slangbuntar.

Manschetterna kan rengöras med desinfektionsmedel eller mekanisk - se Apodans information om rengöring.

Det rekommenderas att använda hygienbyxa, hygienjacka eller dylik tunn klädsel utan sömmar under manschetterna för att skydda huden. Manschetterna finns i olika storlekar och i ett brett sortiment till hela kroppen.

Samtliga illustrerade storlekstabeller avser mätningar på manschetterna utan luft, inte på kroppsdelar.

Se våra instruktionsvideor på www.lymphapress.se.
Välj "Lympha Presspumpar SE" och välj instruktionsvideor.

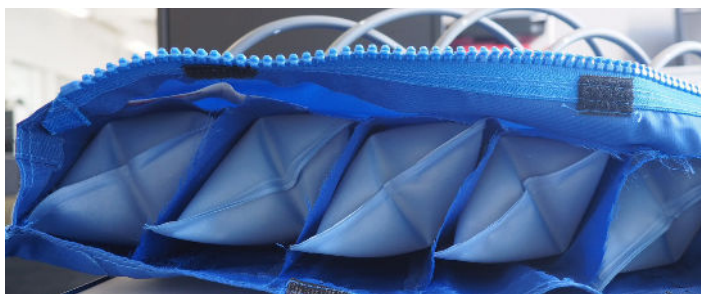

Alla manschetter har överlappande luftkamarer



Manschetten kan justeras i storlek via blixtlås eller kardborreband

Manschetter till överkroppen




Lympha Press Armmanschett med integrerad skuldra

Armmanschettarna rekommenderas till brukare som har ödem i en arm. Manschetten utövar kompression på en arm och samma sidas skuldra. Det sinnrika med en armmanschett som har skulderdel är att vätskan inte ska stanna vid skuldran, utan pressas förbi skuldran så att den lättare tas om hand av lymfkärl och lymfnoder högre upp.

Manschetten sitter på plats under hela behandlingen med ett stadigt diagonalt band över kroppen (se bild). Med ett enkelt program kan kompressionen i skulderdelen kopplas bort, om så önskas. Brukaren har den andra handen fri under behandlingen.

Armmanschetterna har 12 överlappande luftkamrar och finns i 2 längder. Varje armmanschett kan regleras till två olika storlekar med hjälp av integrerade dragkedjor.

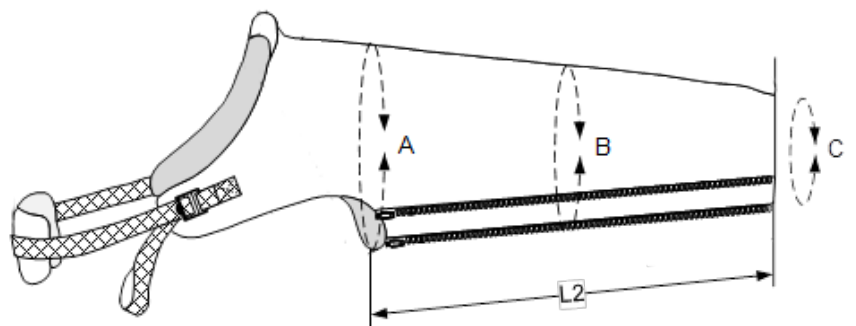

Måttabell för armmanschett med integrerad skuldra

Varunr.	Storlek	Maximal manschettdimension (cm)			Längdmått (cm)
		A (överarm)	B (armbåge)	C (perifert)	L2
022133	Small	52	45	41	72
022135	Standard/Medium	63	49	41	72
022136	XL	74	56	49	91

Manschetter till överkroppen




Lympha Press Comfy Armmanschett (halvjacka)

Comfy Armmanschetten rekommenderas till personer som har ett ödem i en arm och som på samma sida har lymfkärlsproblem på bålen. Trycket från Comfy Armmanschetten tillser att fri vätska mellan cellerna skonsamt transporteras utan att belasta armhålan, varför manschetten passar utmärkt till personer som gjort en axillarutrymning, dvs. tagit bort lymfnoder i armhålan.

Användaren kommer att ha den motsatta armen fri, vilket underlättar användandet i hemmet. Manschetten har 12 överlappande luftkamrar. För korrekt passform justeras storleken med band.

Vid beställning av ComfyArm, höger eller vänster sida, beställs storleksstycket separat.

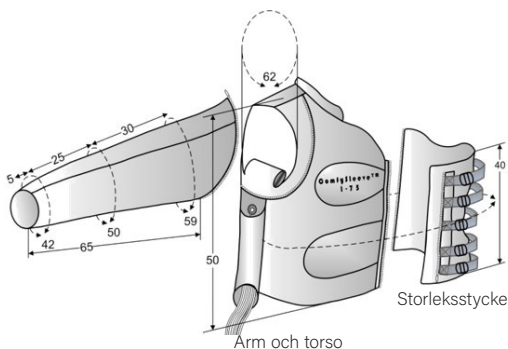

Varunr.	Höger sida	Maximal manschettdimension brösthöjd (cm)
022202	Comfy Armmanschett, höger arm och torso	-
022206	Storleksstycke till 022202 - Small	115
022204	Storleksstycke till 022202 - Medium	125
022207	Storleksstycke till 022202 - Large	140

Varunr.	Vänster sida	Maximal manschettdimension brösthöjd (cm)
022203	Comfy Armmanschett, vänster arm och torso	-
022205	Storleksstycke till 022203 - Small	115
022209	Storleksstycke till 022203 - Medium	125
022208	Storleksstycke till 022203 - Large	140

Manschetter till överkroppen




Lympha Press Jackmanschett

Jackan är anpassad till personer med ödem i armar, skuldror och bröstborg. Ödemet leds förbi armhålan, där passagen hos många användare är mycket begränsad. Jackan har 24 överlappande luftkamarar.

Storleken regleras med hjälp av band och kilar.

Fotavbrytare rekommenderas som tillbehör så att brukaren själv kan stänga av Lympha Press Optimal V2.

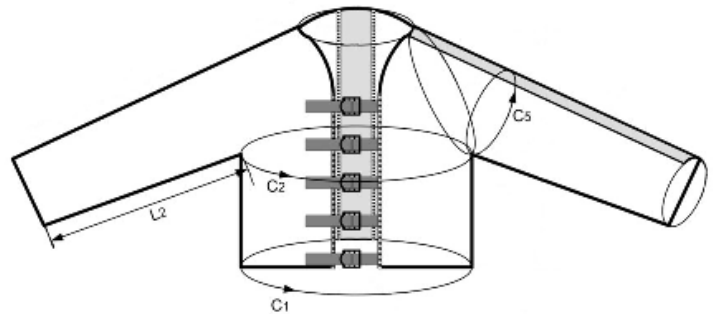

Storlekstabell			Maximal manschettdimension (cm)		
Varunr.	Namn	L2	C1	C2	C5
022033	Jackmanschett, armlängd 72 cm	72	123	123	48
022035	Jackmanschett, armlängd 57 cm	57	123	123	48
022032	Rektangulär kil till rygg	-	133	133	-
022036	En kil till ryggen och två kilar till ärmarna. Passar jackmanschett 022033.	-	133	133	58
022047	Rektangulär, vadderad kil till framsidan	-	137	137	-
022048	Triangulär kil till rygg	-	137	126	-

Manschetter till underkroppen



Lympha Press Benmanschett med kardborrband

Benmanschetterna är tillägnade personer som har ödem i ett ben eller ödem i båda benen utan att kroppen behöver involveras i behandlingen. Benmanschett med 12 överlappande luftkammrar, varav 4 är i fotdelen. Detta ger en mycket bra kompressionsbehandling till foten och ankeln. Benmanschetten kan individanpassas med kardborrband och vid behov med kilar.

Varunr.	Storlek	Maximal manschettdimension (cm)		Manschettlängd (cm)
		Manschettomkrets lår (cm)	Manschettomkrets ankel (cm)	
022121	2-75	70	50	75
022122	2-85	76	50	85
022123	2-95	80	50	95
022124	2-105	84	50	105
022125	3-75	76	53	75
022126	3-85	80	53	85
022127	3-95	85	53	95
022131	3-105	90	53	105
022128	4-75	90	68	75
022129	4-85	96	68	85
022130	4-95	108	68	95

Lympha Press kilar till benmanschetter med kardborreförslutning

Varunr.	Varunamn	Längd (cm)	Bredd (cm)
022085	Kil till underben till benmanschett med kardborrband	30	30
022086	Kil till lår till benmanschett med kardborrband	35	30

Omkringningen av manschetten ökas med 20 cm med hjälp av en kil.

Manschetter till underkroppen




Lympha Press Comfy Benmanschett

Benmanschetterna är tillägnade personer som har ödem i ett ben eller ödem i båda benen utan att centrala delar av kroppen är involverade.

Benmanschetten inkluderar fot och har 12 överlappande luftkamarar, varav 2 är i fotdelen.

Manschetten med blixtlåsförslutning kan inte individanpassas som den med kardborreförslutning.

Omkretsen kan ökas med hjälp av kilar.

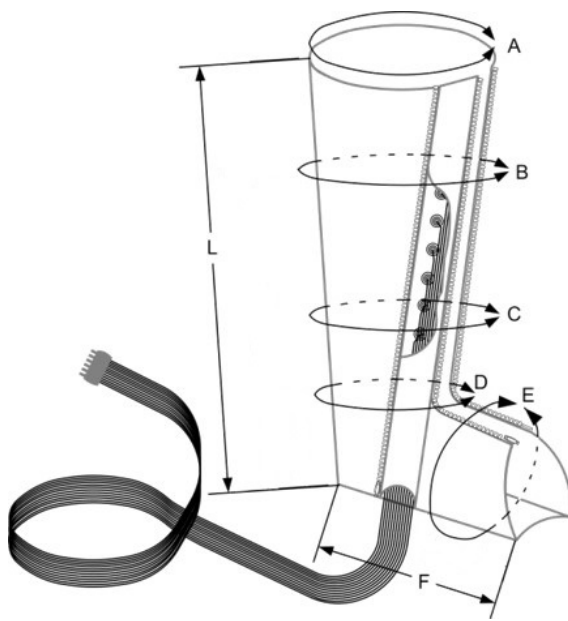

Asymmetrisk
(vadderad)
kil


10 cm



4 cm

Rektangulär
(icke vadderad)
kil

10 cm

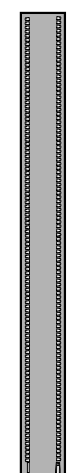

10 cm

Comfy Benmanschett		Manschettmått (cm)							Mått med asymmetrisk kil (cm)					Rektangulär kil (cm)*	
Varunr.	Storlek	A	B	C	D	E	F	L	Varunr.	A	B	C	D	E	Varunr.
022195	2-75 S+	66	56	46	43	48	26	75	022137	76	66	56	48	52	022141
022189	2-85 M	70	60	47	42	48	26	84	022138	80	70	56	49	52	022142
022190	2-95 M+	78	68	51	43	48	26	95	022140	90	82	60	49	52	022144
022191	3-65 L	81	73	60	56	54	37	65	022137	91	83	70	59	60	022141
022192	3-75 L+	85	76	61	56	54	37	75	022138	95	86	71	59	60	022142
022193	3-85 L++	90	80	63	56	54	37	85	022139	100	90	73	59	60	022143
022194	4-75 WL+	94	79	64	64	58	41	75	022138	104	89	73	68	59	022142

*) Vid användning av den rektangulära extensionskilen, ökar manschettmåtten A – E (i det blå område) med 10 cm.

Manschetter till underkroppen




Fotens vinkel regleras med hjälp av "hajfenor" som sitter vid vristen.

Lympha Press Byxmanschett i flera storlekar

Byxmanschetterna Standard och XL används till personer med ödem i ena eller båda benen där höftpartiet och magregionen behöver behandling. För att underlätta på- och avtagande av manschetterna, leveras de nu med slangutgång vid anklarna.

Storleken regleras med hjälp av tre dragkedjor som är placerade längst med utsidan på vardera byxben. Storleken kan ytterligare regleras med hjälp av kilar som kopplas till dragkedjorna i sidorna av byxbenen. Byxmanschetten har 24 överlappande luftkamarer.

Det finns även en Byxmanschett för personer med obesitas, Lympha Pod.

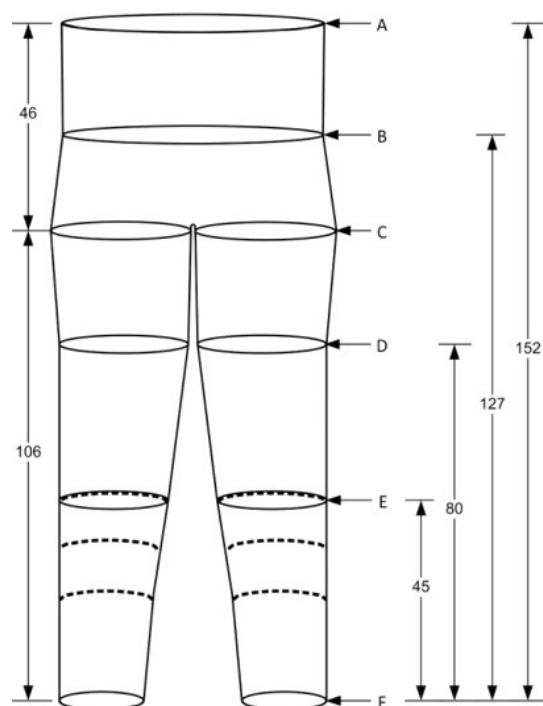

Referenspunkter till måttabell

Måttabell till Byxmanschett standard och XL (cm)

Varunr.	Navn	Maximal manschettdimension (cm)					
		A (midja)	B (höft)	C (lår)	D (knä)	E (ankell)	F (omkrets vid fotändan)
022066	Byxmanschett Standard med slangutgång vid fot	135	134	72	66	58	45
-	Byxmanschett Standard med 1 par kilar	144	154	82	75	65	50
-	Byxmanschett Standard med 2 par kilar	152	168	92	84	72	55
022074	Byxmanschett XL med slangutgång vid fot	170	164	85	82	76	60
-	Byxmanschett XL med 1 par kilar	179	184	95	92	83	65
-	Byxmanschett XL med 2 par kilar	186	201	100	102	100	70
022007	Kilar till Byxmanschett (höger och vänster)						

LymphaPod till personer med obesitas



LymphaPod Byxmanschett

Lympha Press är det enda intermittenta kompressionssystemet som även har kompressionsmanschetter till personer som väger mellan 150–300+ kg.


LymphaPod täcker hela underkroppen med sina 40 överlappande luftkamrar.

LymphaPod har två separata byxben inuti manschetten, som vid behov kan regleras i grenhöjd, t ex vid överhäng av mage och/eller lår.

LymphaPod är ergonomiskt designad till stora personer med begränsad rörlighet.

*LymphaPod kan **endast** användas med Lympha Press Optimal och senare modeller.*

Preterapiprogrammet rekommenderas inte när man använder LymphaPodmanschetten.

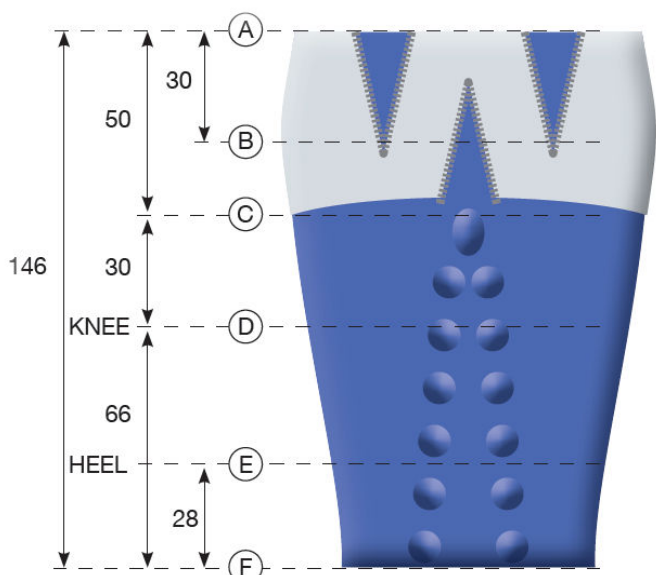

Teckning av LymphaPod manschett i sin helhet med referenspunkter. Mätning bör göras av båda benen.

Varunr.	Namn	LymphaPod Byxmanschett, mått i cm					
		A (midja) Max	B (höft) Max	C (lår) Max	D (knä) Max	E (ankel) Max	F (omkrets vid fotändan) Max
022181	LymphaPod Byxmanschett med slangutgång på höger sida	206	212	130	125	104	87
022179	LymphaPod Byxmanschett med slangutgång på vänster sida	206	212	130	125	104	87
-	LymphaPod med 1 kil i den ena sidan	222	227	143	138	114	95
-	LymphaPod med 1 kil i varja sida	238	242	143	138	114	95
022177	Extensionskil till högra sidan av LymphaPod manschetten						
022176	Extensionskil till vänstra sidan av LymphaPod manschetten						

Mätpunkter på kroppen inför val och storlek av manschett

Mätpunkter på kroppen - Mät med måttband, men dra inte åt så att huden trycks in!

Till överkroppsmanschetter	Armmanschett	Comfy arm	Jackmanschett
Omkrets underarm, bredaste stället	x	x	x
Omkrets armbåge, med sträckt arm	x	x	x
Omkrets överarm, bredaste stället	x	x	x
Omkrets bål i brösthöjd		x	x
Omkrets midja (mellan revben och höftben)		x	x
Armlängd, sträckt arm (från långfingerspets till armhåla)	x	x	x
Ange höger eller vänster sida		x	



Armmanschett



Comfy Armmanschett



Jackmanschett

Till underkroppsmanschetter	Benmanschetter, alla	Byxmanschetter och LymphaPod
Omkrets ankel	x	x
Omkrets vad, bredaste stället	x	x
Omkrets knä, med sträckt ben	x	x
Omkrets lår, bredaste stället	x	x
Omkrets höft, bredaste stället		x
Omkrets midja		x
Benlängd medialt (mät på insidan av benet från golv till gren)	x	x



Benmanschett med karborrband och fyra luftkammare i foten



Comfy Benmanschett med blixtlås och en luftkammare i foten



Byxmanschett Standard eller XL



LymphaPod Byxmanschett

Val av manschettstorlek

När pumpen fyller manschetten med luft, kommer luftintaget att anpassa kompressionen efter kroppskonturen. Välj därför en större manschettstorlek än kroppsmåtten.

Tänk på att när luften fylls i benmanschettens luftkammare under foten, så kommer manschetten att dras något nedåt (i perifer riktning). Därför rekommenderar vi att man väljer en benmanschett som är cirka 10 cm längre än personens benlängd.

- Varför? - Just därför att...

Lympha Press

- Är en CE-märkt medicinteknisk utrustning.
- Har använts över hela världen i över 50 år och har en medicinsk, bevisad effekt.
- Utbudet på produkter och tillbehör är brett med storlekar som passar alla.
- Är ett innovativt system och lyssnar på brukaren för att ständigt se till att utrustningen är under utveckling och förbättring.
- Är ett användarvänligt och hållbart system med konkurrenskraftiga priser och 2 års garanti.

Varför vänder sig de flesta till leverantören APODAN A/S?

- Apodan är en etablerad och erfaren dansk leverantör av vårdprodukter sedan 1962, är ISO-certifierad 13485.
- Har legitimerade sjuksköterskor, medicinsk lymfterapeut och välutbildad sjukvårdspersonal med mångårig erfarenhet av kompression.
- Kundtjänst / teknisk support mellan kl. 8-16 vardagar.
- Lagerhåller varor i Danmark för säkerställande av snabb och säker leverans.
- Kan vid behov erbjuda konsultationsverksamhet med lymfterapeut.



”Som marknadens vinnande leverantör, drivs vi av viljan, idén och numera möjligheten att kunna göra skillnad för personer med ödem.”
Målet är att förbättra användarens hälsa och livskvalité”.

För mer information, kontakta:



Sue Mellgrim
Konsult

Tlf.: 070 853 0787
info@lymfterapi.com



Johan Helmer
Konsult

Tlf.: 727 152 575
vistamedicalab@gmail.com



Lyngsø Alle 3 | DK-2970 Hørsholm, Danmark

Tlf.: +45 3297 1525 | info@apodan.dk | www.lymphapress.se | CVR Nr: DK 14 12 38 49