

Lympha Press PCD-51

Har du en kronisk lidelse og brug for Lympha Press som et varigt hjælpemiddel, kan du søge din kommune om en bevilling efter servicelovens paragraf 112.

Kontakt os hvis du har brug for ansøgningshjælp.



Nylon armmanchet



Nylon benmanchet



Personlig benmanchet



Nylon benmanchet

Kontakt os for mere information, råd og vejledning.

Se vores instruktionsvideoer på lymphapress.dk.



Lyngsø Alle 3 | DK-2970 Hørsholm

Tlf.: 32 97 15 25 | ks@apodan.dk | www.lymphapress.dk | CVR Nr: DK 14 12 38 49

0325

Apodan anvender FSC®, ECF og European Ecolabel godkendt papir.



Informationsfolder

Kompression på ødem - letter dit problem



4-KAMMER KOMPRESSIONSPUMPE



Formålet med at anvende Lympha Press PCD-51

At afhjælpe dig af med gener i arme og ben f.eks. ved ødem (væskeophobning), spændt væv, tyngdefornemmelse, sår og smerter.

Metoden

Lympha Press arbejder i princippet som dine fingre, når du skal tømme en tube tandpasta for det sidste indhold. Du skubber et par gange på tuben med dine fingre opad mod tubens åbning.

Lympha Press PCD-51 kompressionssystemet består af en pumpe med en eller to manchetter, der hver indeholder fire overlappende kamre. Kamrene fyldes med luft i retning mod kroppen, hvorefter der er en pause, inden luftopfyldningen starter igen.

Lufttrykket føles som en blød rullende massage. Virkningen er, at lymfe- og venesystemet stimuleres, og væsken presses væk fra arm eller ben, så ødemet blødgøres og generne formindskes.

Det er individuelt, hvor længe du skal anvende Lympha Press pr. gang, hvilket tryk i mmHg og hvor mange gange dagligt.

Fagudtrykket er intermitterende pneumatisk kompression. (IPC)

Anvendelse

Lympha Press PCD-51 er meget let at anvende. Du skal bare sætte dig behageligt eller ligge ned, og tage manchetten på arm eller ben.

Tænd for pumpen og tryk på start, så får du intermitterende kompression i den indstillede tid ved det valgte tryk.




14 dages gratis lån

Du kan gratis låne Lympha Press i 14 dage af Apodan for at prøve effekten hjemme hos dig selv. Inden afprøvning skal en sundhedsfaglig person vurdere, om du er egnet til anvende Lympha Press.

Tilbuddet gør sig gældende for dig som ønsker at søge din hjemkommune om en eventuel bevilling af et varigt hjælpemiddel.


Se mere på kompressionspumpe.dk

Ben med ødem

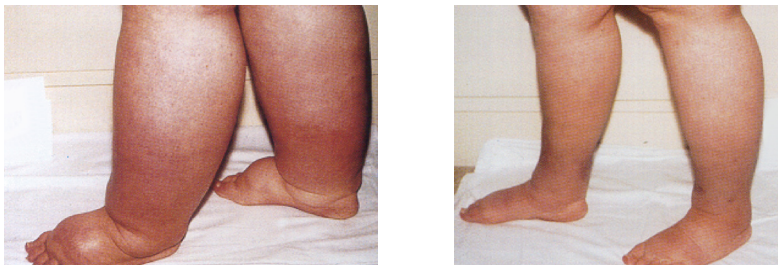

Før og efter forløb med IPC

Vanskeligt helende sår

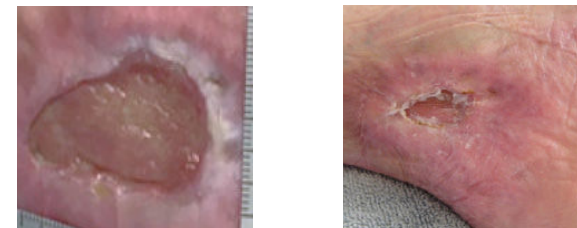

Før og efter forløb med IPC