

QuickGuide

Lympha Press® PCD-51 nylon benmmanchet

Lympha Press® PCD-51 er et kompressionssystem, som giver lufttryksmassage. Det består af en pumpe, der forbindes til en **4-kammermanchet** manchet via luftslanger. Det pulserende lufttryk (kompression) lindrer generne ved bl.a. ødem.




1. Tilslut strømforsyningen til pumpen og placer ledningen i holderen bag på pumpen som anvist på billedet.



Hvis du skal ud og rejse, kan hanstikket udskiftes ved at trykke og trække ned som vist på billedet

Holder til kabel

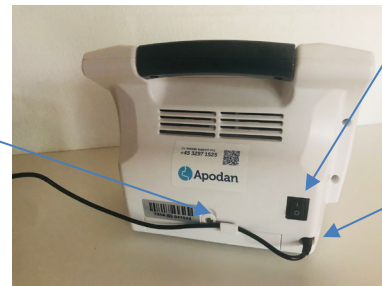

Tænd/sluk knap

Tilslut strømkabel

2. Tilslut slangebundet til pumpen og indstil den korrekt efter anvisningen.

Manchet

Fastmonteret slangebundet



Hvis der kun bruges én manchet anvend blindproppen

LED-lys

Hvid: pumpen er tændt
Grøn: kompression er i gang
Orange: fejl

Drejeknap til låsning af indstillet tryk

Time -
Indstilling af tid

Pressure -
Indstilling af tryk

Start/stop knap

Tilslutning af
slangebundet til pumpe

Blindprop til evt. blokering
af luftudgang



Det er vigtigt, at man placerer sig afslappet - liggende eller siddende med støtte i ryggen, så der er fri passage af væske gennem lysken.

Det anbefales, at der bruges et par leggings eller strømpebukser under benmanchetten, helst uden søm. Dette anvendes, for at beskytte huden og lette rengøringen af manchetten.

Hvis der er sår, hvor manchetten skal sidde, skal der anvendes en tør absorberende forbindelse. Ved risiko for gennemsivning af forbindingen, skal en plasticpose anvendes på benet under manchetten.



Indstilling af tryk og tid

Korrekt indstilling af tryk/tid er individuel.

Formålet ved anvendelse af PCD-51 er, at man skal have en lindring af sine gener men ikke føle ubehag ved anvendelse af Lympha Press®.

Start med at anvende et lavt tryk, så man kan vurdere, hvordan kroppen reagerer på kompression. Efterfølgende kan trykket justeres efter behov.

Som udgangspunkt anbefales det at anvende PCD-51: 2-4 gange pr. døgn i 30 – 60 min. pr. gang. Hvis du er i tvivl om tryk og tid, kan du eventuelt spørge en sundhedsfaglig person, som har kendskab til dine gener.

Efter anvendelse

Når pumpen er slukket, tages manchetten af, og den elektriske ledning kan tages ud af stikkontakten.

Ved transport skal strømforsyningen og slangebundter afmonteres fra pumpen.

Slangebundterne afmonteres ved at trykke ind på siden af stikket.

Rengøring

Det elektriske stik skal være ude af kontakten, inden pumpen rengøres. Man kan aftørre pumpen udvendig med en fugtig klud eller et desinfektionsmiddel. Der må ikke komme væske ind i pumpen. Manchetten kan ligeledes aftørres med desinfektionsmiddel.

For yderligere information henvises til brugervejledningen, som findes på hjemmesiden:

www.lymphapress.dk



Importeret af Apodan A/S

Lyngsø Alle 3A, Bygning 16, 2. sal | DK-2970 Hørsholm | Denmark

T: (+45) 32971525 | ks@apodan.dk | www.apodan.dk