



QUICKGUIDE

GENDAN TIL FABRIKSINDSTILLINGER

LYMPHA PRESS OPTIMAL PLUS

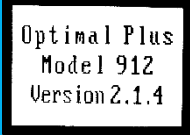

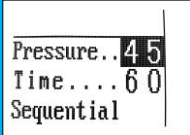
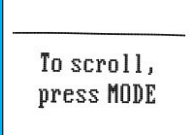



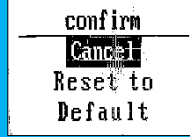
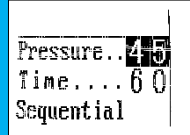




PUMPEN OG BETJENINGSPANEL:



PUMPENS KNAPPER:

KNAP	FUNKTION
	Mode (Programknap): Bruges til at vælge tryk, tid, program, pausetid og holdtid.
	Pil OP- og NED (Reguleringsknapper): Bruges til at justere tryk, tid, program, pausetid og holdtid.
	START/STOP: Bruges til at starte eller stoppe kompressionen.
	Select (Vælgknap): Bruges til at bekræfte valg eller ændringer af indstillinger.

GENDAN TIL FABRIKSINDSTILLINGER:

SKÆRM	FUNKTION
	<p>Strømkabel sættes i pumpen og ind i egnet stikkontakt.</p> <p>Tænd pumpen på venstre side. Knappen sættes i position I.</p>  <p>Velkomstskaerm: Viser modelnummer og version et kort øjeblik.</p>
	<p>Derefter vises en skærm med Pressure (Tryk) Time (Tid) og Program.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Hold MODE (Programknap)  nede i et par sekunder. • Skærmen " To Scroll press MODE" (For at scrolle tryk MODE) vises på skærmen. • Tryk på Mode (Programknap)  indtil nedenstående skærm vises på pumpen.
  	<p>Reset to default (Nulstil til standard) – Denne skærm tillader at gendanne til fabriksindstillinger:</p> <p>Tryk Reguleringsknap NED. </p> <p>Vælg OK ved at trykke på Select (Vælgknap) </p> <p>Nu vises skærm med Confirm (Bekræft).</p> <p>Tryk Reguleringsknap NED. </p> <p>Vælg OK ved at trykke at på Select </p> <p>Der hører 2 bip – Pumpen er nu gendannet til fabriksindstillinger og skærmen med Pressure (Tryk) Time (Tid) og Program vises.</p>