

SNABBGUIDE

ÅTERSTÄLL TILL FABRIKSINSTÄLLNINGAR

LYMPHA PRESS® OPTIMAL PLUS

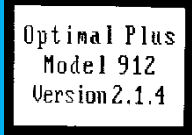
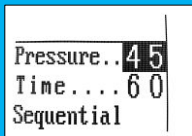
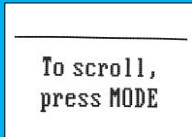
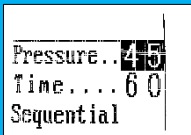
PUMP OCH KONTROLLPANEL:



PUMPENS KNAPPAR:

KNAPP	FUNKTION
	Mode (programknapp): används för att välja tryck, tid, program, paustid och hålltid.
	Pilarna UPP och NED (Regleringsknappar): används för att justera tryck, tid, program, paustid och hålltid.
	START/STOPP: Används för att starta eller stoppa kompressionen.
	Select: (Valknapp) används för att bekräfta val eller ändringar av inställningar.

ÅTERSTÄLLNING TILL FABRIKSINSTÄLLNINGARNA:

SKÄRM	FUNKTION
	Strömkabeln kopplas in i pumpen och i ett lämpligt uttag. Slå på pumpen på vänster sida. Knappen sätts i position I. Kontakt för strömkabel På/Avknäpp  Välkomstskärm: visar kortfattat modellnummer och version.
	Därefter visas en skärm med Pressure (Tryck) Time (Tid) och Program.
	- Håll ned MODE (Programknapp)  i ett par sekunder. - Skärmen "To Scroll press MODE" (Tryck på MODE för att scrolla) visas på skärmen. - Tryck på Mode (Program-knappen)  tills skärmen nedan visas på pumpen.
	Reset to default (nollställ till standard) - På den här skärmen kan du återställa till fabriksinställningarna: Tryck på Regleringsknappen NED.  Välj OK genom att trycka på Select (Väljknappen). 
	Nu visas en skärm med Confirm (Bekräfta). Tryck på Regleringsknappen NED.  Välj OK genom att trycka på Select 
	Två pip hörs - pumpen är nu återställd till fabriksinställningarna och skärmen med Pressure (Tryck) och Program visas.



Importerad av Apodan A/S

Lyngsø Alle 3A, byggnad 16, 2. sal | DK-2970 Hørsholm | Danmark

T: (+45) 32971525 | info@apodan.dk | www.apodan.dk

05/25