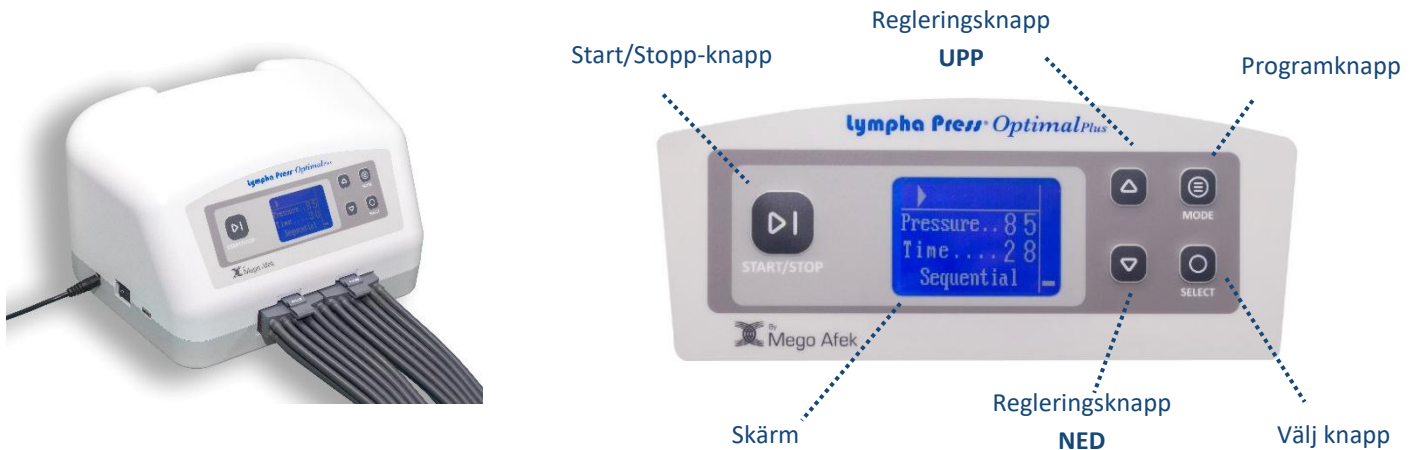


SNABBGUIDE FÖRINSTÄLLD PUMP OCH GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING

LYMPHA PRESS® OPTIMAL PLUS



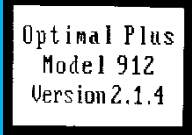
PUMP OCH KONTROLLPANEL:

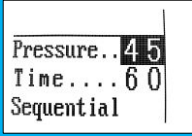


PUMPENS KNAPPAR:

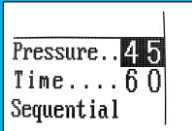
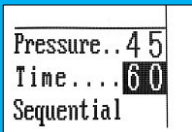
KNAPP	FUNKTION:
	Mode (programknapp): används för att välja tryck, tid, program, paustid och hålltid.
	Pilarna UPP och NED (Regleringsknappar): används för att justera tryck, tid, program, paustid och hålltid.
	START/STOPP: Används för att starta eller stoppa kompressionen.
	Select: (Valknapp) används för att bekräfta val eller ändringar av inställningar.

GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING VID FÖRINSTÄLLD PUMP:

SKÄRM	FUNKTION:
	Strömkabeln kopplas in i pumpen och i ett lämpligt eluttag. Slå på pumpen på vänster sida. Knappen sätts i position I. Välkomstskärm: visar kortfattat modellnummer och version.

SKÄRM	FUNKTION:
	Tryck START på Start/Stopp.  Kompressionen startar med det förinställda trycket, tid och program. Pumpen kan ALLTID stoppas. Tryck STOP på Start/Stopp.  Trycket kan regleras på pumpen under användning med pilarna UPP och NED.   Skärmen visar alltid: inställt tryck, tid och program. Pumpen stannar när kompressionstiden har gått ut.

INSTÄLLNING AV TRYCK OCH TID:

SKÄRM	FUNKTION:
	Displayen visar det inställda trycket i luftkammare 1 - den luftkammare som ligger längst bort från hjärtat. I exemplet till vänster är trycket 45 mmHg. Pressure (Tryck) kan ändras när siffran bredvid Pressure är markerad. Om siffran bredvid Pressure inte är markerad – Tryck på Select  tills trycket är markerat. Trycket kan sedan ökas eller minskas med hjälp av pilarna UPP och NED.  
	Skärmen visar den inställda tiden. I exemplet till vänster är kompressionstiden 60 minuter. Den valda kompressionstiden kan ändras när siffran bredvid Time är markerad. Om siffran bredvid Time inte är markerad - Tryck på Selectj  tills tiden är markerad. Kompressionstiden kan sedan ökas eller minskas med hjälp av pilarna UPP och NED.   Kompressionstiden kan ställas in mellan 15 och 90 minuter. Kompressionstiden reduceras automatiskt under användning. Tilllägg av andra program (t.ex. för- och efterbehandling) ingår i den totala kompressionstiden.

