



# SNABBGUIDE

## ÅTERSTÄLL TILL FABRIKSINSTÄLLNINGAR

LYMPHA PRESS OPTIMAL PLUS

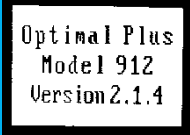

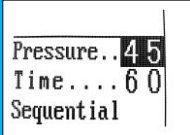
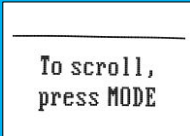








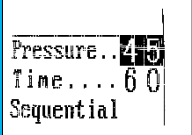
### PUMP OCH KONTROLLPANEL:



### PUMPENS KNAPPAR:

KNAPP	FUNKTION
	<b>Mode (programknapp):</b> används för att välja tryck, tid, program, paustid och hålltid.
	<b>Pilarna UPP och NED (Regleringsknappar):</b> används för att justera tryck, tid, program, paustid och hålltid.
	<b>START/STOPP:</b> Används för att starta eller stoppa kompressionen.
	<b>Select: (Valknapp)</b> används för att bekräfta val eller ändringar av inställningar.

## ÅTERSTÄLLNING TILL FABRIKSINSTÄLLNINGARNA:

SKÄRM	FUNKTION
	<p>Ström kabeln kopplas in i pumpen och i ett lämpligt uttag.</p> <p>Slå på pumpen på vänster sida. Knappen sätts i position I.</p> <p>Kontakt för ström kabel</p>  <p>På/Avknäpp</p> <p><b>Välkomstsärm:</b> visar kortfattat modellnummer och version.</p>
	<p>Därefter visas en skärm med Pressure (Tryck) Time (Tid) och Program.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Håll ned <b>MODE (Programknapp)</b>  i ett par sekunder.</li> <li>• Skärmen " To Scroll press MODE" (Tryck på MODE för att scrolla) visas på skärmen.</li> <li>• Tryck på <b>Mode (Program-knappen)</b>  tills skärmen nedan visas på pumpen.</li> </ul>
	<p>Reset to default (nollställ till standard) - På den här skärmen kan du återställa till fabriksinställningarna:</p> <p>Tryck på <b>Regleringsknappen NED.</b> </p> <p>Välj <b>OK</b> genom att trycka på <b>Select (Väljknappen).</b> </p>
	<p>Nu visas en skärm med Confirm (Bekräfta).</p> <p>Tryck på <b>Regleringsknappen NED.</b> </p> <p>Välj <b>OK</b> genom att trycka på <b>Select</b> </p>
	<p>Två pip hörs - pumpen är nu återställd till fabriksinställningarna och skärmen med Pressure (Tryck) och Program visas.</p>