

curea medical

PRODUKTKATALOG



curea medical GmbH	Side	4
SuperCore®	Side	5
Sårbehandling steril		
curea P1	Side	8
curea P1 DUO	Side	10
curea P1 DUO active	Side	12
curea P1 BORDER	Side	14
curea P1 easy	Side	16
curea P1 drain	Side	18
curea P1 Heel	Side	20
curea P2	Side	22
Sårbehandling usteril		
curea clean	Side	24
curea clean BTBS	Side	25
Hygiejne		
curea Liquimat basic	Side	28
curea Liquimat standard	Side	29
curea Liquimat premium	Side	30
curea Liquisorb	Side	31
curea 150	Side	32
curea SafeCare	Side	33
Ekspert rapporter	Side	34
Produktoversigt	Side	36
Ansvarlig udgiver	Side	40

curea medical GmbH

Din kompetente partner indenfor moderne sårbehandling og hygiejneprodukter ... må vi præsentere os?

Vi er en virksomhed etableret i marts 2010 som et datterselskab af McAirLaid's Vliesstoffe GmbH.

McAirLaid's er en af Europas førende producenter af specialfremstillede nonwoven produkter, samt udvikler af den patenterede SuperCore® teknologi og er derfor en erfaren samarbejdspartner. Som tidligere producent af private label produkter indenfor medico branchen giver vores moderselskab os mangeårig erfaring og kompetence.

Vi fokuserer på kvalitet, innovation og forbedring af det daglige arbejde indenfor sundhedsområdet. Den direkte adgang til produktionen i Tyskland giver os mulighed for hurtigt og fleksibelt at tilpasse vores produkter til kundernes behov.

Prøv dem selv og bliv overbevist!

- ☒ Moderne produkter med patenteret SuperCore® teknologi
- ☒ Kvalitet "Made in Germany"
- ☒ Certificeret i henhold til DIN EN ISO 13485, CE-mærket iht. Direktivet for Medicinsk Udstyr



Produktion i Berlingerode, Tyskland


“Hjertet” i vores produkter: det patenterede SuperCore®



SuperCore® teknologien udgør kernen i vores produkter. SuperCore® består af en kombination af cellulose og natriumpolyakrylat sammensmeltet i en patenteret fremstillingsproces uden anvendelse af klæbe- eller bindemidler. Sammenlignet med konventionelle absorberende midte giver produkterne med SuperCore® følgende fordele:

- ✓ Hurtig absorption af store mængder væske
- ✓ Ensartet fordeling og sikker retension af absorberede væsker
- ✓ Sikker binding af bakterier

Produkter med SuperCore® teknologien giver derfor store fordele ved moderne sårbehandling, ligesom det bidrager til at højne hygiejnen på såvel hospitaler som i primær sektor.

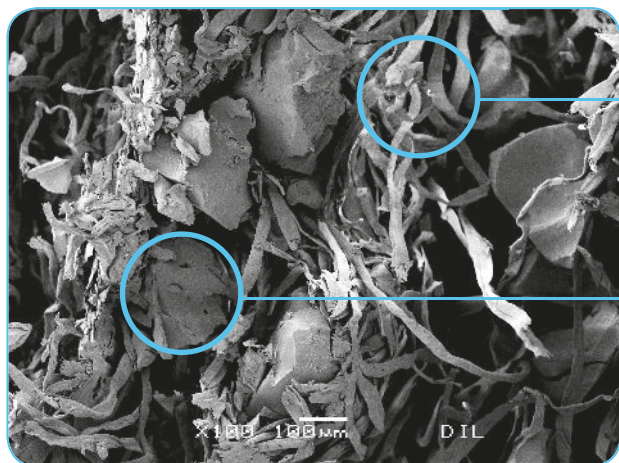

SuperCore® RE, set i et mikroskop

Cellulosefibre

skaber hurtig absorption og videre-transport af væsker

Natriumpolyakrylat

skaber sikker retension af absorberede væsker

Sårbehandling

Hvorfor vælge sårforbindinger fra curea medical? 10 overbevisende grunde til at understøtte din beslutning




Minimeret risiko for maceration af sår og hudomgivelser gennem sikker binding af eksudat og bakterier¹




Absorption af blod²




Bakteriehæmmende egenskaber reducerer lugt

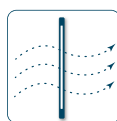

Åndbarhed (3500 g/m² inden for 24 timer)

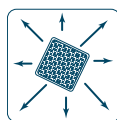

Mange forskellige indikationer

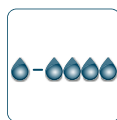

Anvendes på let til kraftigt ekssuderende sår



Op til 7 dage mellem forbindingsskift



Længere perioder mellem forbindingsskift giver økonomiske fordele



Mindre forbindingsmateriale, mindre affald




Forbedret livskvalitet

Lær vores produkter at kende!

steril
curea P1
curea P1 DUO
curea P1 DUO active
curea P1 BORDER
curea P1 easy
curea P1 drain
curea P1 Heel
curea P2

usteril
curea clean
curea clean BTBS

curea P1 — effektiv behandling af sår i ekssudationsfasen

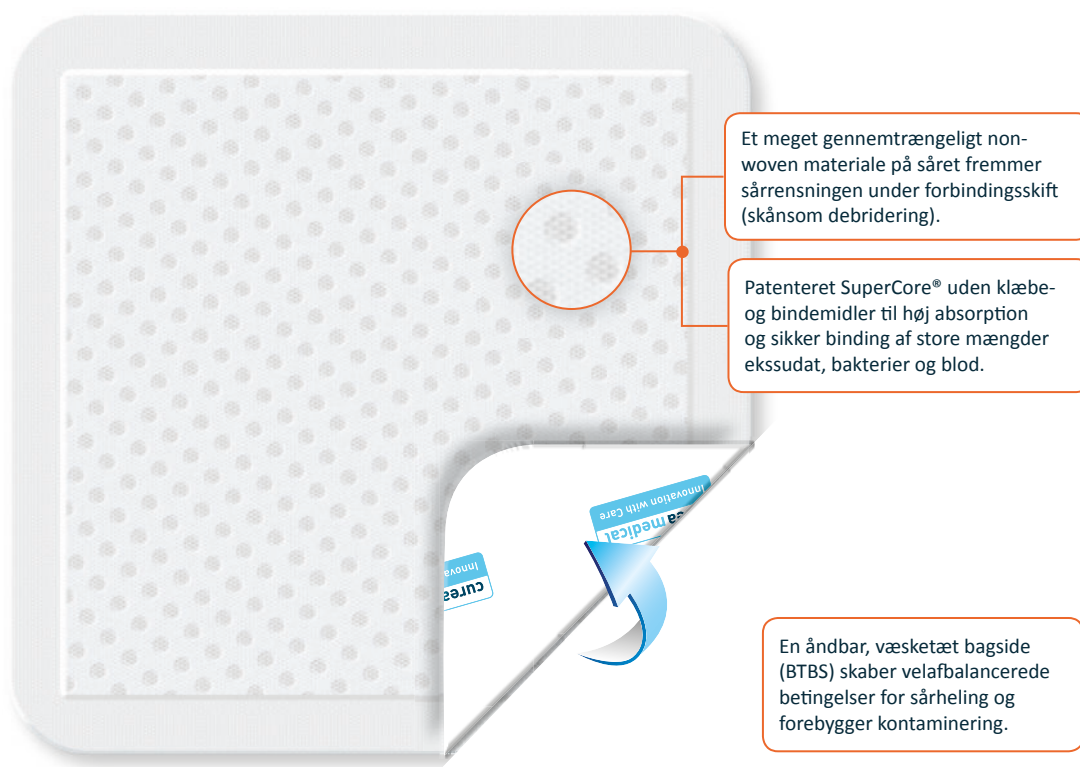

Karakteristika og fordele


-  Høj absorption selv under kompression
-  Sikker retension af store mængder ekssudat
-  Reduceret risiko for maceration af sår og hudomgivelser
-  Dokumenteret binding og reduktion af bakterier og lugt¹
-  Dokumenteret binding af fuldblod²
-  Skånsom debridering ved forbindingsskift
-  Åndbar, væsketæt bagside (BTBS) fungerer som en steril barriere
-  Holder såret fugtigt (ingen udtørring af såret)
-  Forebyggelse af lækage og kontaminering
-  Trykt bagside reducerer risikoen for forkert applikation
-  Bæretid op til 7 dage
-  Bredt udvalg af størrelser

Indikation

curea P1 er til behandling af let og kraftigt eksuderende sår. Det kan anvendes ved såvel akutte som kroniske sår.

Eksempler på anvendelse

- ☒ Akutte sår
- ☒ Traumatiske sår
- ☒ Inficerede sår
- ☒ Kroniske sår som eks. bensår, venøse sår, blandingssår, arterielle sår, diabetisk fodsår, tryksår

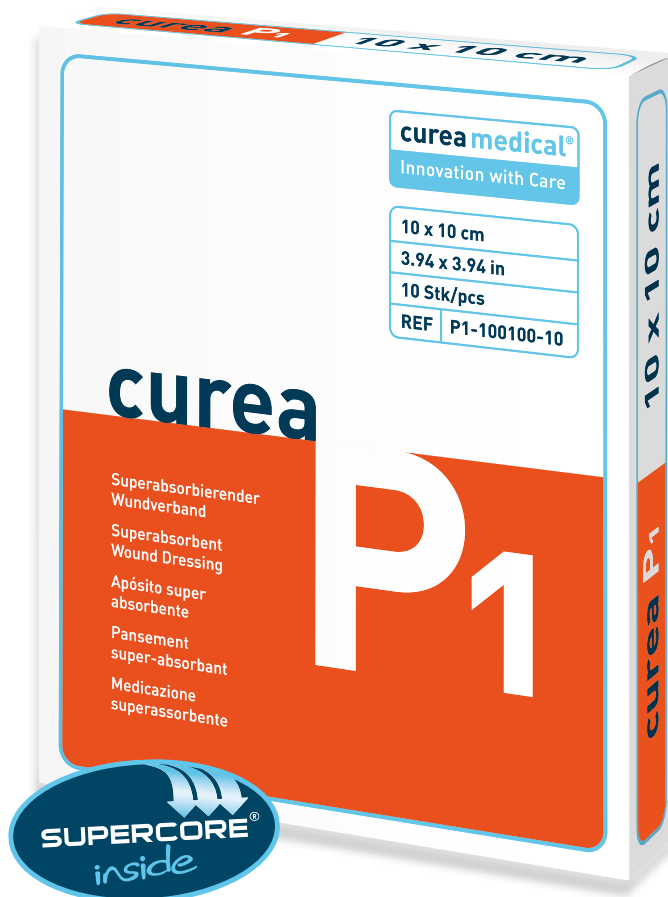


12 størrelser



Størrelse	Størrelse på sugende midte	Artikelnr. Pakke à 2 eller 5 stk.	Artikelnr. Pakke à 10 stk.	Artikelnr. Pakke à 25 stk.	Artikelnr. Pakke à 50 stk.
5,5 x 7,5 cm	3,5 x 5,5 cm	-	P1-055075-10	-	-
5,5 x 13 cm	3,5 x 11 cm	-	P1-055130-10	-	-
7,5 x 7,5 cm	6,5 x 6,5 cm	-	P1-075075-10	P1-075075-25	P1-075075-50
10 x 10 cm	9 x 9 cm	P1-100100-5 (5 stk.)	P1-100100-10	P1-100100-25	P1-100100-50
10 x 15 cm	8 x 13 cm	-	P1-100150-10	-	-
10 x 20 cm	8 x 18 cm	P1-100200-5 (5 stk.)	P1-100200-10	P1-100200-25	P1-100200-50
10 x 30 cm	8 x 28 cm	-	P1-100300-10	P1-100300-25	P1-100300-50
15 x 15 cm	13 x 13 cm	-	P1-150150-10	P1-150150-25	P1-150150-50
20 x 20 cm	18 x 18 cm	-	P1-200200-10	P1-200200-25	P1-200200-50
20 x 30 cm	18 x 28 cm	-	P1-200300-10	P1-200300-25	P1-200300-50
25 x 40 cm	20 x 35 cm	P1-250400-2 (2 stk.)	P1-250400-10	-	-
40 x 60 cm	37 x 57 cm	P1-400600-2 (2 stk.)	P1-400600-10	-	-

curea P1 DUO — kan appliceres med begge sider mod såret, mindre risiko for fejlansvendelse

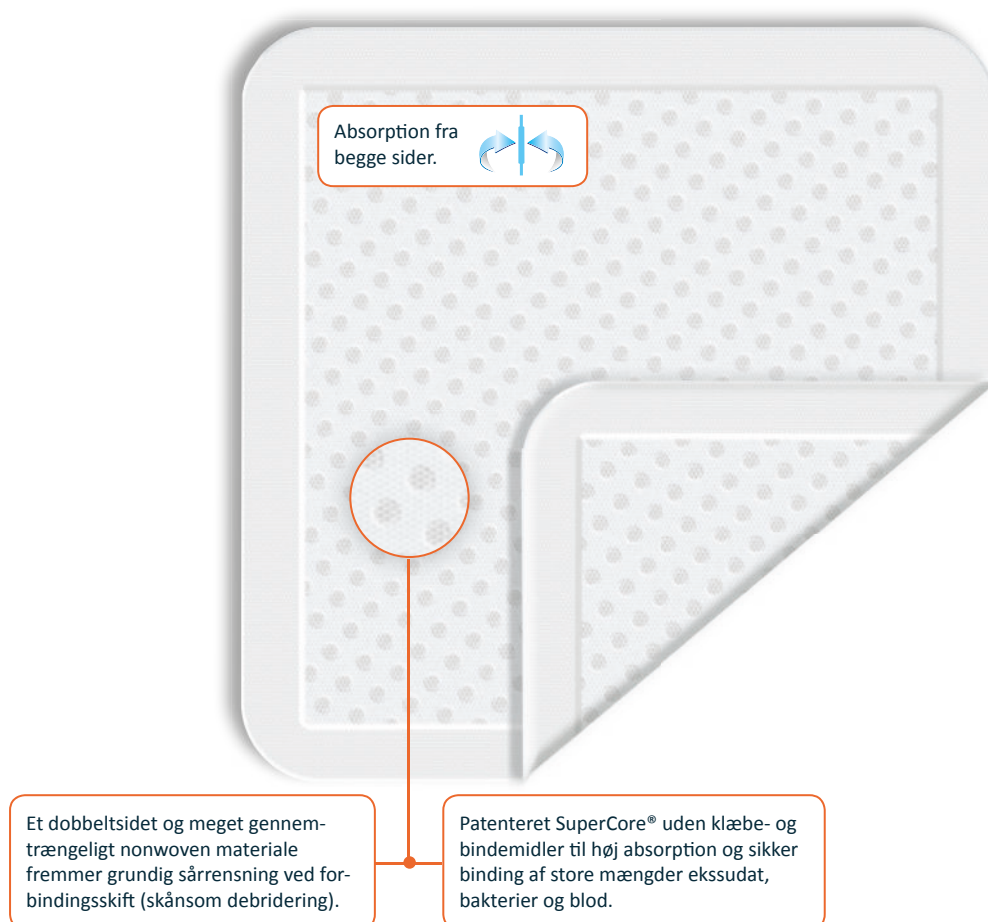

Karakteristika og fordele


-  Let håndtering takket være applicering med begge sider mod såret
-  Mindre risiko for forkert anvendelse
-  Meget høj åndbarhed
-  Høj absorption selv under kompression
-  Sikker binding af store mængder ekssudat med SuperCore®
-  Reduceret risiko for maceration af sår og hudomgivelser
-  Dokumenteret binding og reduktion af bakterier og lugt¹
-  Dokumenteret binding af blod²
-  Skånsom debridering ved forbindingsskift
-  Bæretid op til 7 dage

Indikation

curea P1 DUO er til behandling af let til kraftigt eksuderende sår. Det kan anvendes ved såvel akutte som kroniske sår.

Eksempler på anvendelse

- ☒ Akutte sår
- ☒ Traumatiske sår
- ☒ Inficerede sår
- ☒ Kroniske sår som eks. bensår, venøse sår, blandingssår, arterielle sår, diabetisk fodsår, tryksår

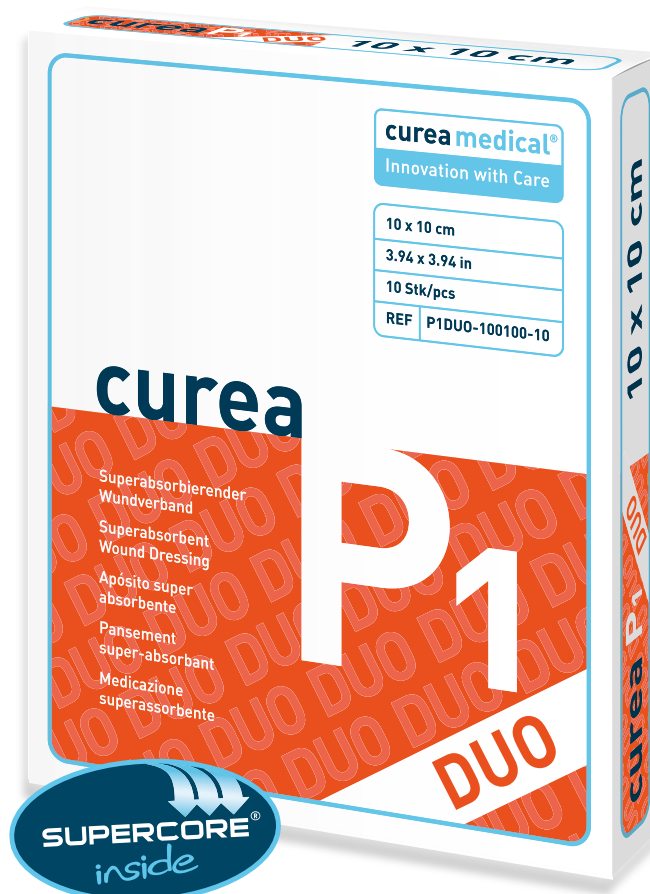


6 størrelser



Størrelse	Størrelse på sugende midte	Artikelnr. Pakke à 10 stk.	Artikelnr. Pakke à 25 stk.
5,5 x 25 cm	3,5 x 23 cm	P1DUO-055250-10	-
7,5 x 7,5 cm	6,5 x 6,5 cm	P1DUO-075075-10	P1DUO-075075-25
10 x 10 cm	9 x 9 cm	P1DUO-100100-10	P1DUO-100100-25
10 x 20 cm	8 x 18 cm	P1DUO-100200-10	P1DUO-100200-25
20 x 20 cm	18 x 18 cm	P1DUO-200200-10	P1DUO-200200-25
20 x 30 cm	18 x 28 cm	P1DUO-200300-10	P1DUO-200300-25

curea P1 DUO active — multifunktionel med et lag af kul

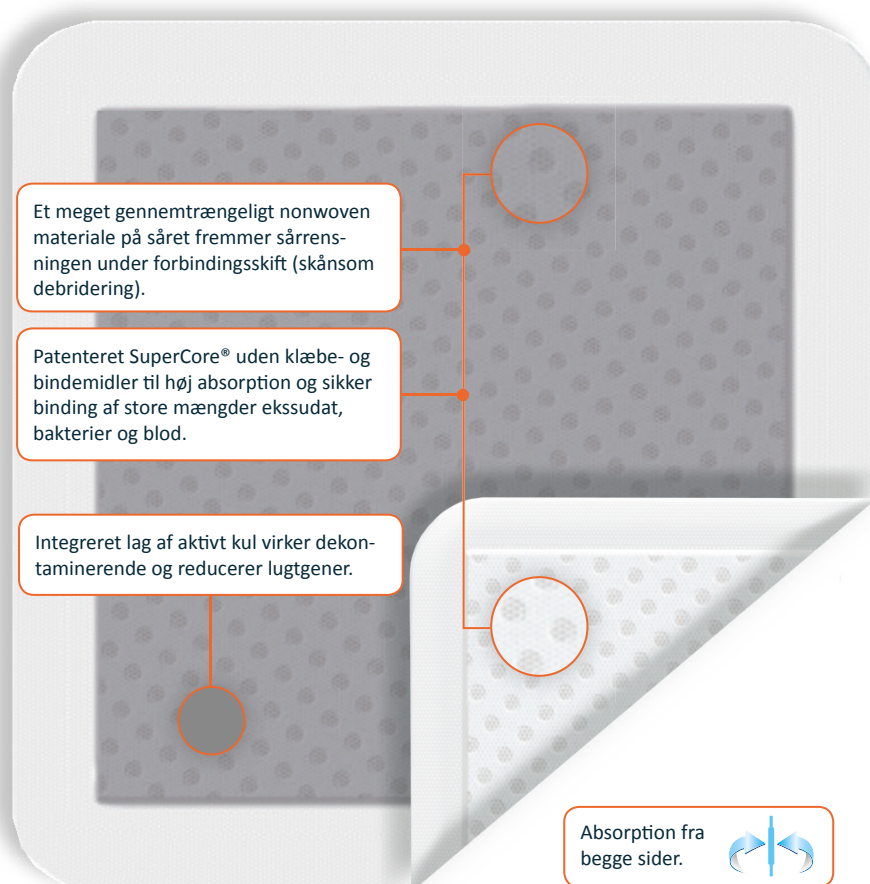


Karakteristika og fordele

-  Lag af aktivt kul til dekontaminering og endnu større reduktion af lugt
-  Kan appliceres med begge sider mod såret ved forskellige indikationer
-  Sikker binding af store mængder eksudat med SuperCore®
-  Reduceret risiko for maceration af sår og hudomgivelser
-  Dokumenteret binding og reduktion af bakterier og lugt¹
-  Dokumenteret binding af blod²
-  Skånsom debridering ved forbindingsskift
-  Bæretid op til 7 dage

Indikation

curea P1 DUO kan appliceres med begge sider mod såret: Den sorte side på såret vil øge dekontamineringen (eks. mikrober og endotoksiner), mens den hvide side mod såret vil absorbere ildelugtende eksudat, hvilket sammen med det aktive kul reducerer lugtgener.

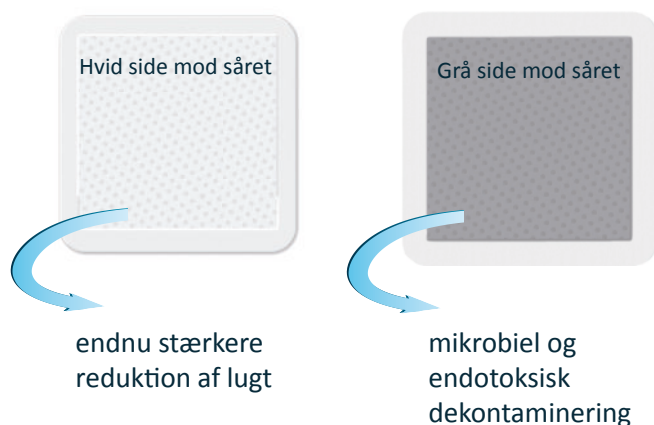


Eksempler på anvendelse

- | | |
|---|---|
| ☒ Akutte og kroniske sår | ☒ Ildelugtende sår/tumorer |
| ☒ Let til kraftigt ekssuderende sår | ☒ Fungøse carcinomer |
| ☒ Inficerede sår | ☒ Efter fjernelse af tumorer og abscesser |
| ☒ Inficerede overfladiske defekter | ☒ Bensår, diabetisk fodsår, tryksår |

Størrelse	Størrelse på sugende midte	Artikelnr. Pakke à 10 stk.
10 x 10 cm	9 x 9 cm	C1DUO-100100-10
10 x 20 cm	8 x 18 cm	C1DUO-100200-10
20 x 20 cm	18 x 18 cm	C1DUO-200200-10
20 x 30 cm*	18 x 28 cm	C1DUO-200300-10

*Størrelse 20 x 30 cm kan fås fra Q2, 2019

curea P1 BORDER — klæbende sårbandage

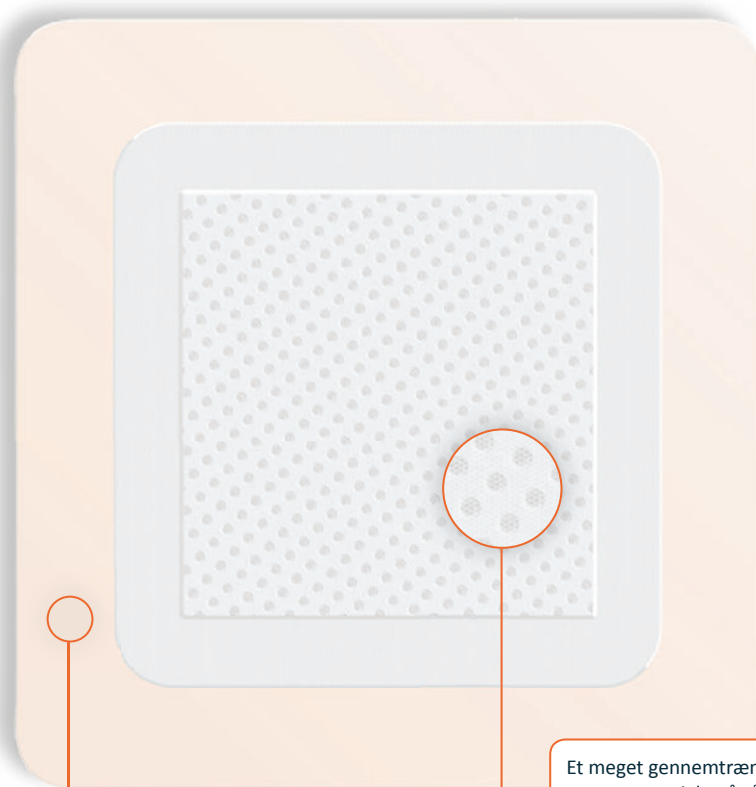

Den klæbende og brede kant sikrer en enkel ap-
plicering og optimal fiksering. Der er ikke behov for
yderligere fiksering.

Et meget gennemtrængeligt non-
woven materiale på såret fremmer
sårrensningen under forbindingsskift
(skånsom debridering).

Patenteret SuperCore® uden klæbe-
og bindemidler til høj absorption
og sikker binding af store mængder
ekssudat, bakterier og blod.

Karakteristika og fordele


-  Selvklæbende kanter gør bandagen enkel i brug og giver sikker fiksering
-  Ingen yderligere materialer til fiksering er nødvendige
-  Sikker binding af store mængder ekssudat med SuperCore®
-  Reduceret risiko for maceration af sår og hudomgivelser
-  Dokumenteret binding og reduktion af bakterier og lugt¹
-  Dokumenteret binding af blod²
-  Skånsom debridering ved forbindingsskift
-  Åndbar, væske og bakterietæt bagside af polyuretanfilm sikrer mod kontaminering udefra
-  Bæretid op til 7 dage

Indikation

curea P1 BORDER anvendes til let til kraftigt væskende sår, hvor huden omkring såret tåler klæbende fiksering. Produktet er let at applikere og giver en sikker fiksering uden behov for yderligere fiksering. curea P1 BORDER er specielt velegnet til aktive patienter og er desuden brusetæt.

Eksempler på anvendelse

- ☒ Akutte sår
- ☒ Traumatiske sår
- ☒ Inficerede sår
- ☒ Kroniske sår som eks. bensår, venøse sår, blandingssår, arterielle sår, diabetisk fodsår, tryksår

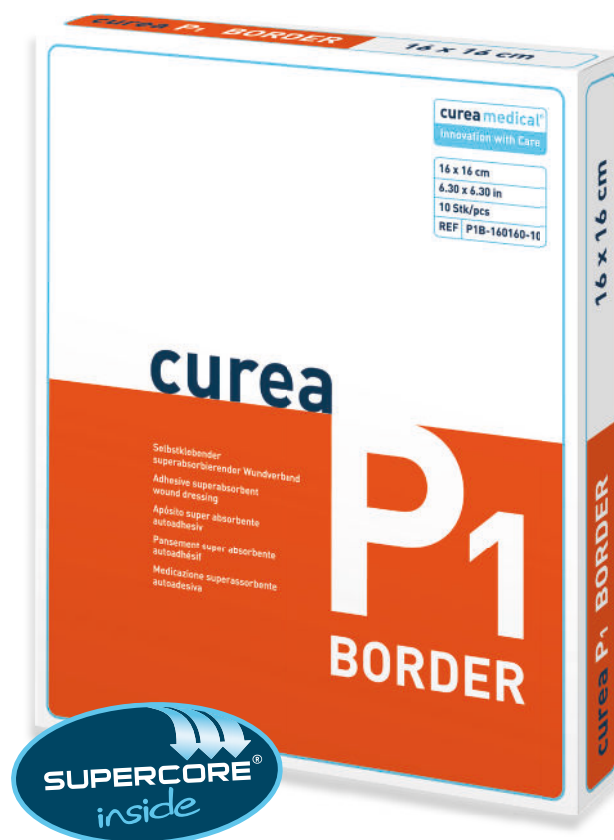


3 størrelser



Størrelse	Størrelse på sugende midte	Artikelnr. Pakke à 10 stk.
12 x 12 cm	5,5 x 5,5 cm	P1B-120120-10
16 x 16 cm	9 x 9 cm	P1B-160160-10
15 x 25 cm	8 x 18 cm	P1B-150250-10

curea P1 easy — med silikonekant som en 3. hånd

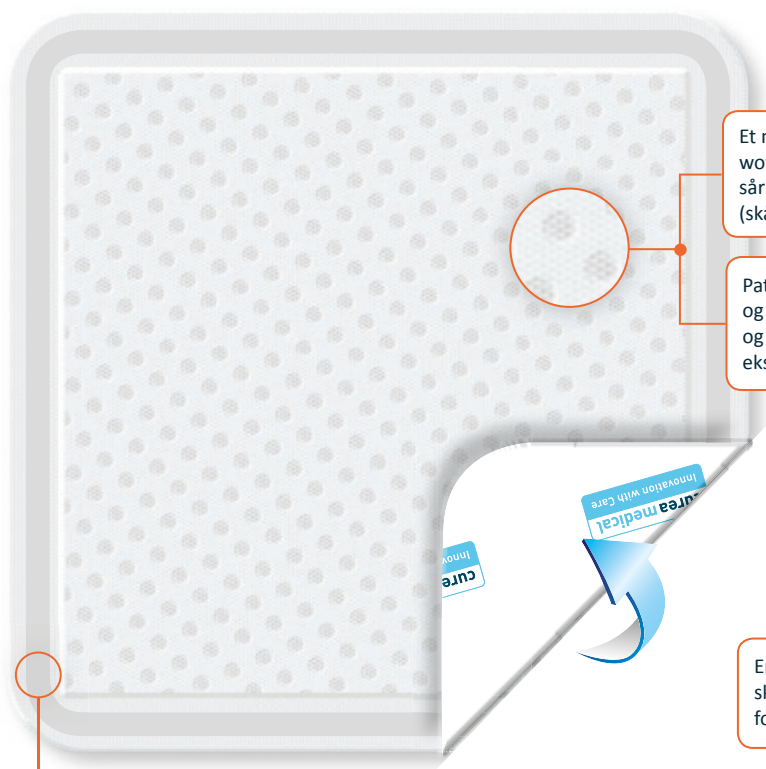

Et meget gennemtrængeligt non-woven materiale på såret fremmer sårrensningen under forbindelsesskift (skånsom debridering).

Patenteret SuperCore® uden klæbe- og bindemidler til høj absorption og sikker binding af store mængder eksudat, bakterier og blod.

En åndbar, væsketæt side (BTBS) skaber optimalt sårhelingsmiljø og forebygger kontaminering.

Blød, klæbende silikonekant sikrer let applicering og forhindrer, at forbindingen flytter sig inden fikseringen.

Karakteristika og fordele

-  Blød, klæbende silikonekant muliggør nem placering og genplacering
-  Bliver på plads inden fiksering
-  Høj absorption selv under kompression
-  Sikker binding af store mængder eksudat med SuperCore®
-  Dokumenteret binding og reduktion af bakterier og lugt¹
-  Dokumenteret binding af blod²
-  Skånsom debridering ved forbindelsesskift
-  Åndbar, væsketæt bagside (BTBS) fungerer som en steril barriere
-  Reduceret risiko for maceration af sår og hudomgivelser
-  Silikone efterlades ikke i såret eller på huden
-  Bæretid op til 7 dage

Indikation

curea P1 easy med en blød, klæbende silikonekant. Den sikrer enkel og atraumatisk forbindelsesskift, fungerer som en "tredje hånd" og kan genplaceres.


Eksempler på anvendelse

- ☒ Akutte sår
- ☒ Traumatiske sår
- ☒ Inficerede sår
- ☒ Kroniske sår som eks. bensår, venøse sår, blandingssår, arterielle sår, diabetisk fodsår, tryksår




Applicering


1.

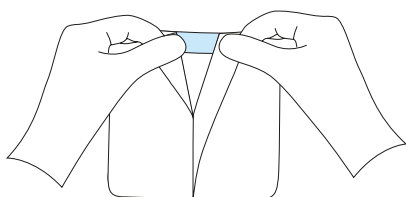

2.

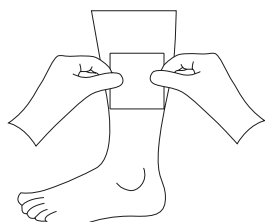

3.

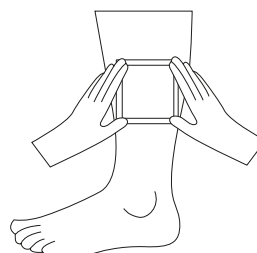

4.




2 størrelser



Praktisk i brug sammen med HekaFix Comfort (= bluse til fiksering af sårbandager på overkroppen)

Størrelse	Størrelse på sugende midte	Artikelnr. Pakke à 10 stk.
11 x 11 cm	9 x 9 cm	P1E-110110-10
10 x 20 cm	8 x 18 cm	P1E-100200-10

curea P1 drain — ekssudatkontrol til dræn og sondesystemer

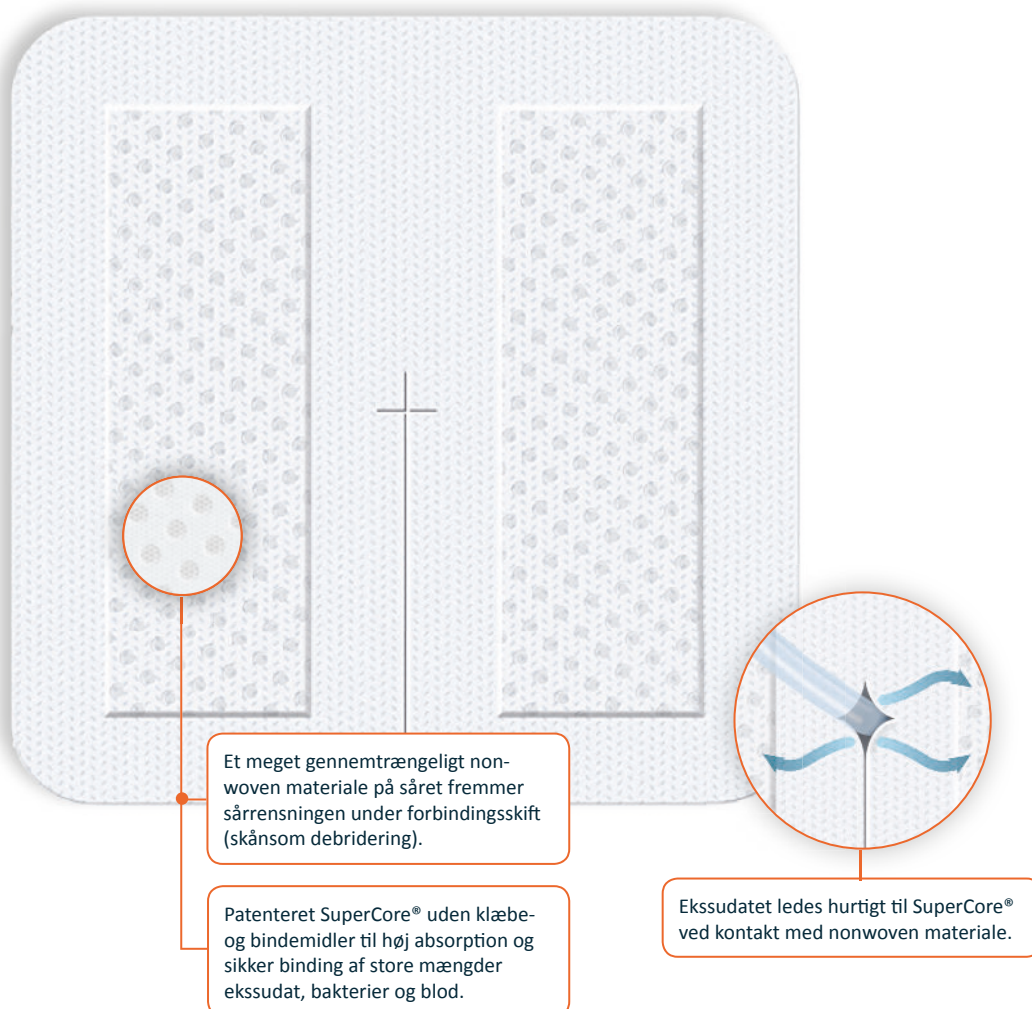

Karakteristika og fordele

-  SuperCore® sårbandage med slids
-  Absorption fra begge sider
-  Sikker binding af ekssudat med SuperCore®
-  Reduceret risiko for maceration af sår og hudomgivelser
-  Dokumenteret binding og reduktion af bakterier og lugt¹
-  Dokumenteret binding af blod²
-  Bæretid op til 7 dage
-  Passer til CH 9-24

Indikation

curea P1 drain er velegnet til dræn- og sonde systemer og giver effektiv kontrol af eksudat.




Eksempler på anvendelse

- ☒ PEG sonder
- ☒ Suprapubiske katetre
- ☒ Infusionskatetre
- ☒ Tracheostomier
- ☒ Eksterne dræn (eks. thoraxdræn, sårdræn, bloddræn)

Størrelse	Størrelse på sugende midte	Artikelnr. Pakke à 5 stk.	Artikelnr. Pakke à 25 stk.	Artikelnr. Pakke à 50 stk.
12 x 12 cm	2 x (3,5 x 9 cm)	P1-100100D-5	P1-100100D-25	P1-100100D-50

curea P1 Heel — til behandling af sår i hælområdet

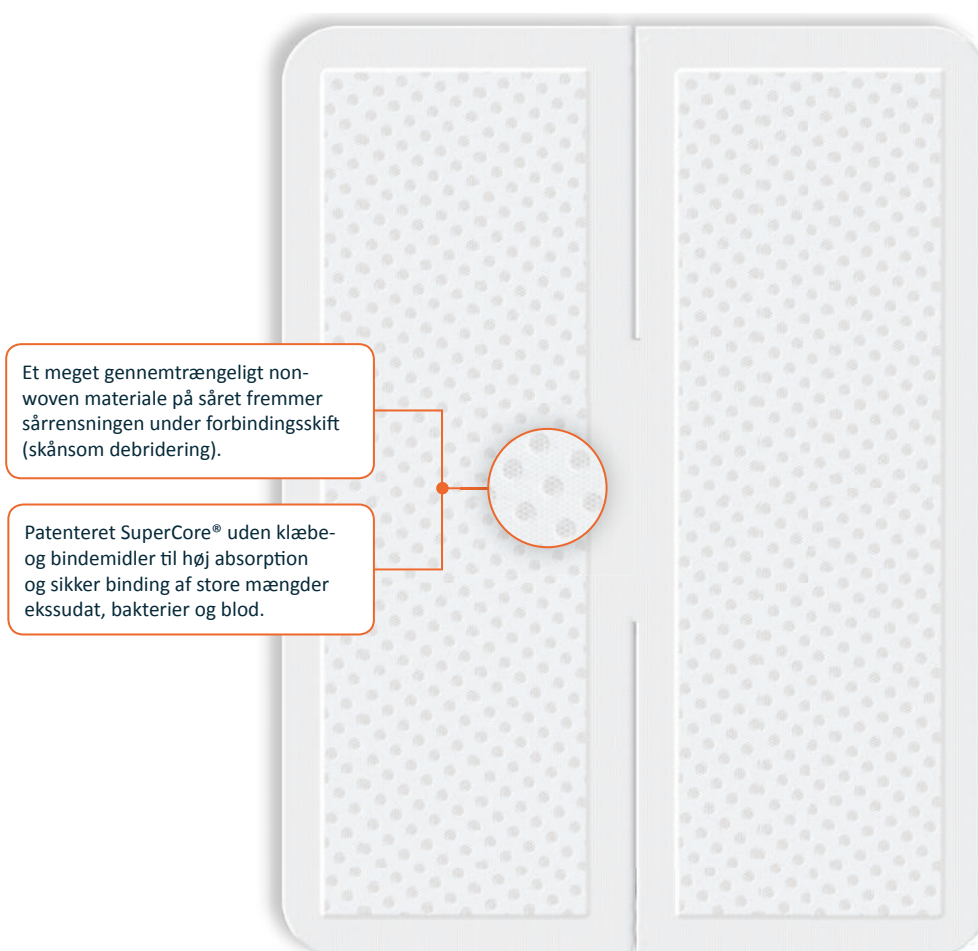

Karakteristika og fordele

-  Høj absorption selv under kompression
-  Sikker binding af store mængder ekssudat med SuperCore®
-  Reduceret risiko for maceration af sår og hudomgivelser
-  Dokumenteret binding og reduktion af bakterier og lugt¹
-  Dokumenteret binding af blod²
-  Skånsom debridering ved forbindingsskift
-  Åndbar, væsketæt bagside (BTBS) fungerer som en steril barriere
-  Forebyggelse af lækage og kontaminering
-  Holder såret fugtigt (ingen udtørring af såret)
-  Bæretid op til 7 dage

Indikation





curea P1 Heel er udviklet til effektiv behandling af sår i hæloområdet.

Eksempler på anvendelse

- ☒ Akutte sår
- ☒ Traumatiske sår
- ☒ Inficerede sår
- ☒ Kroniske sår som eks. bensår, venøse sår, blandingssår, arterielle sår, diabetisk fodsår, tryksår



Applicering

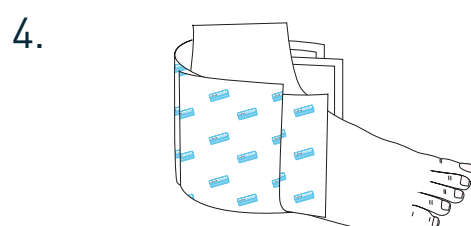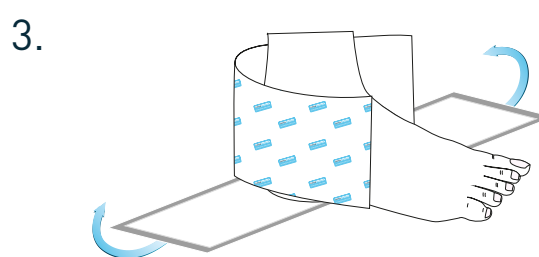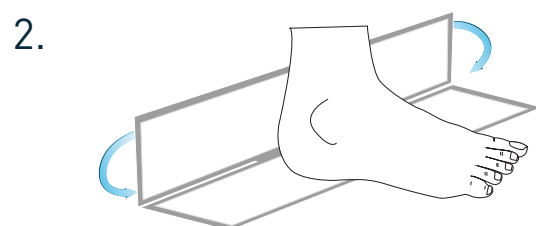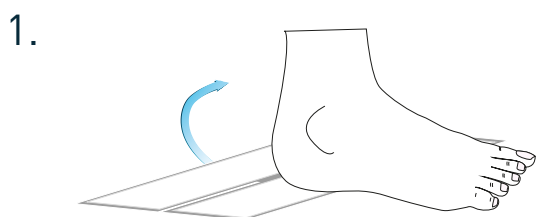


Størrelse
20 x 30 cm

Størrelse på sugende midte
2x (6,5 x 27 cm)

Artikelnr. Pakke à 5 stk.
P1H-200300-5

curea P2 — atraumatiske forbindsskift i granulationsfasen

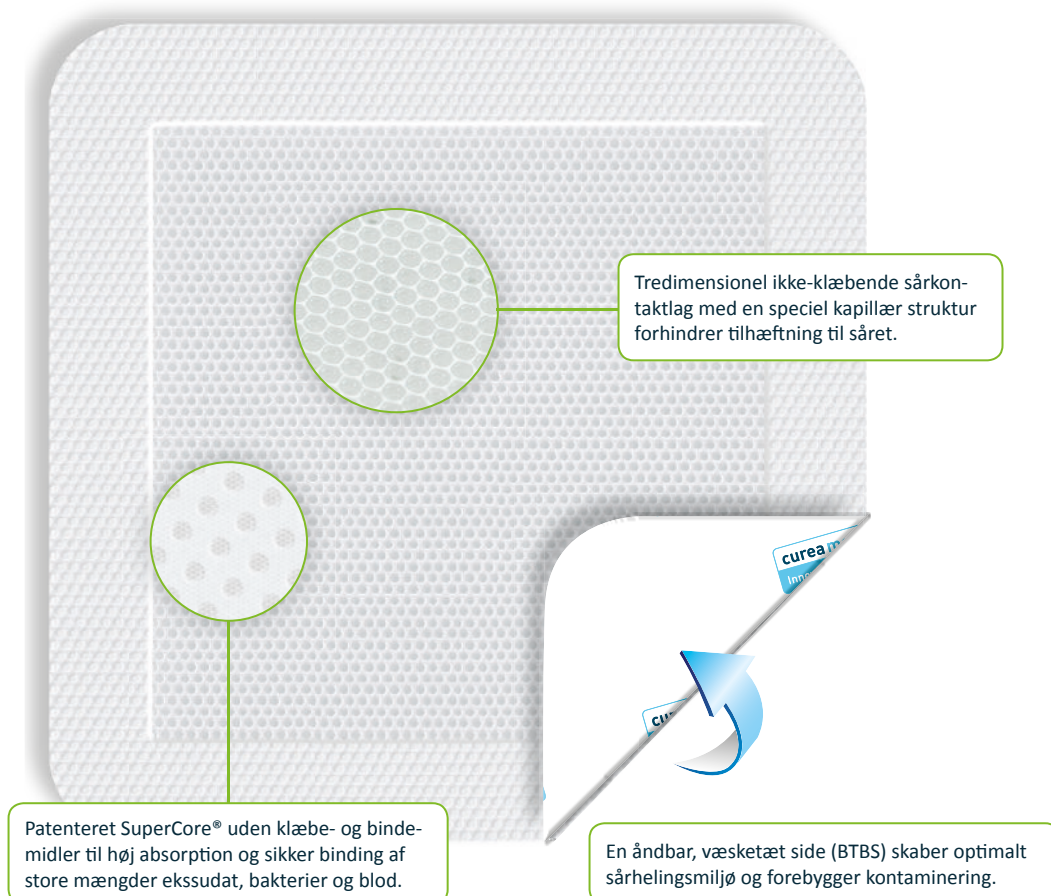

Karakteristika og fordele


-  Minimeret tilhæftning til såret og rundt om såret
-  Sikker binding af store mængder eksudat med SuperCore®
-  Høj absorption selv under kompression
-  Reduceret risiko for maceration af sår og hudomgivelser
-  Dokumenteret binding og reduktion af bakterier og lugt¹
-  Dokumenteret binding af blod²
-  Tredimensionelt sårkontaktlag forebygger tilhæftning til såret og beskytter nyt granulationsvæv
-  Åndbar, væsketæt bagside (BTBS) medvirker til optimalt fugtigt sårmiljø
-  Steril barriere forebygger kontaminering
-  Trykt bagside reducerer risiko for fejlanvendelse
-  Bæretid op til 7 dage

Indikation

curea P2 er velegnet til let til kraftigt ekssuderende sår med nyt granulationsvæv.

Eksempler på anvendelse

- ☒ Sår i granulationsfasen eller i forskellige stadier af heling
- ☒ Postoperativ sårbehandling
- ☒ Brandsår
- ☒ Transplantater og donorsteder
- ☒ Overfladiske hudafskrabbinger
- ☒ Sårbare
- ☒ Epidermolysis bullosa
- ☒ Forfrysning (kuldeskader)
- ☒ Brandsår forårsaget af syre

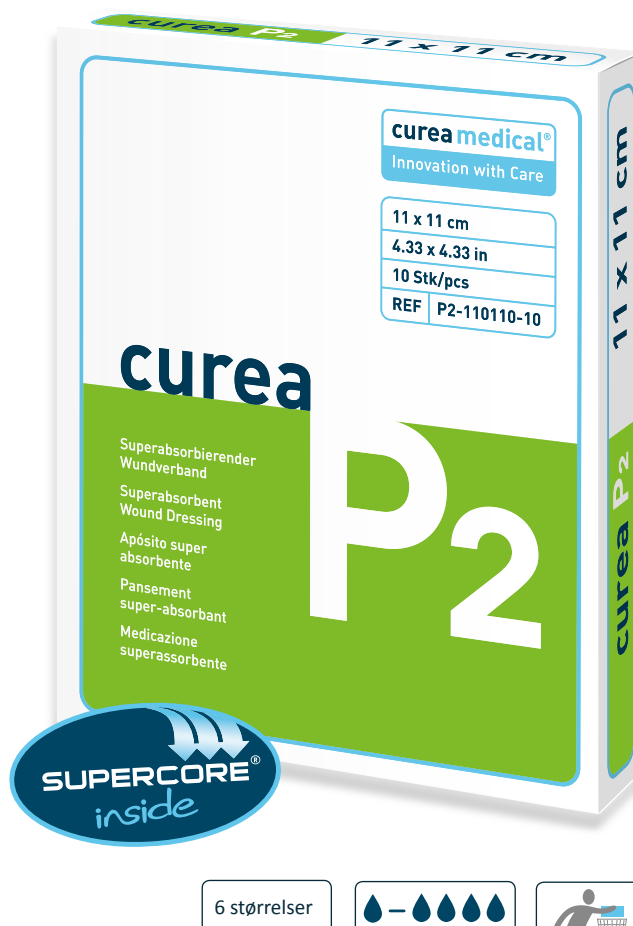


Størrelse	Størrelse på sugende midte	Artikelnr. Pakke à 2 eller 5 stk.	Artikelnr. Pakke à 10 stk.	Artikelnr. Pakke à 25 stk.
11 x 11 cm	9 x 9 cm	P2-110110-5 (5 stk.)	P2-110110-10	P2-110110-25
10 x 20 cm	8 x 18 cm	P2-100200-5 (5 stk.)	P2-100200-10	P2-100200-25
15 x 15 cm	13 x 13 cm	-	P2-150150-10	P2-150150-25
20 x 20 cm	18 x 18 cm	-	P2-200200-10	P2-200200-25
20 x 30 cm	18 x 28 cm	-	P2-200300-10	P2-200300-25
25 x 55 cm	20 x 50 cm	P2-250550-2 (2 stk.)	-	-

curea clean — usteril superabsorberende bandage



5 størrelser

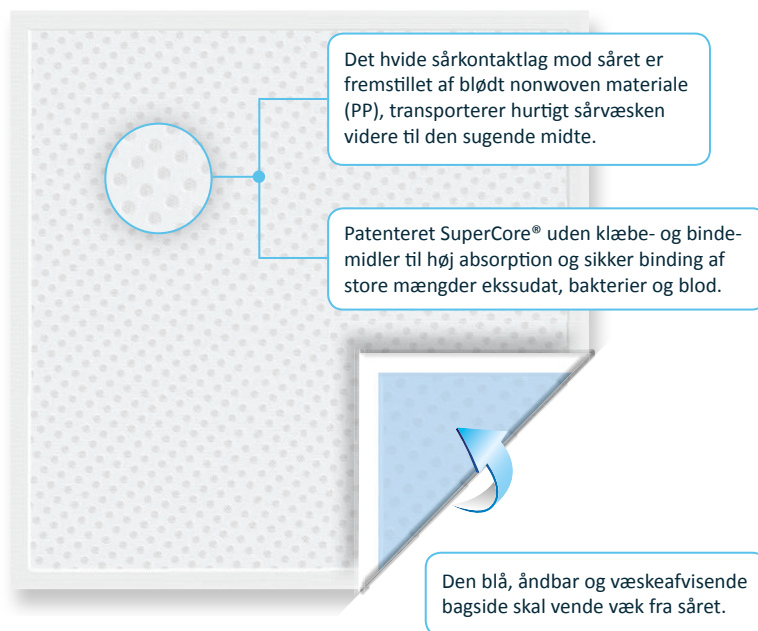

Karakteristika og fordele

-  Høj absorption – selv under kompression
-  Sikker retension af selv store mængder eksudat
-  Reduceret risiko for maceration af sår og hudomgivelser
-  Dokumenteret binding og reduktion af bakterier og lugt¹
-  Dokumenteret binding af fuldblod²
-  Sikrer et fugtigt sårmiljø – udtørre ikke såret
-  Fungerer som en usteril sekundær bandage
-  Med blå væskeafvisende bagside, for at sikre korrekt anvendelse

Indikation

curea clean er en usteril superabsorberende bandage, der anvendes som en sekundær bandage ved moderat til kraftigt væskende sår.

Den er udviklet til håndtering af store mængder eksudat, hvor en steril bandage ikke er nødvendig, eks. ved kroniske sår.

Størrelse	Størrelse på sugende midte	Pakkestørrelse	Artikelnr.
10 x 10 cm	7 x 7 cm	100	CC-100100
10 x 20 cm	7 x 17 cm	50	CC-100200
15 x 15 cm	12 x 12 cm	50	CC-150150
20 x 20 cm	17 x 17 cm	25	CC-200200
20 x 30 cm	17 x 27 cm	25	CC-200300

curea clean BTBS — usteril superabsorberende bandage med åndbar, væsketæt bagside



Karakteristika og fordele

- Høj absorption – selv under kompression
- Sikker retension af selv store mængder eksudat
- Reduceret risiko for maceration af sår og hudomgivelser
- Dokumenteret binding og reduktion af bakterier og lugt¹
- Dokumenteret binding af fuldblod²
- Åndbar og væsketæt bagside fungerer som steril barriere
- Sikrer et fugtigt sårmiljø – udtørre ikke såret
- Fungerer som en usteril sekundær bandage
- Produktnavn trykt på bagsiden medvirker til korrekt applikation

Indikation

curea clean BTBS er en usteril superabsorberende bandage, der anvendes som en sekundær bandage ved moderat til kraftigt væskende sår.

Den er udviklet til håndtering af store mængder eksudat ved eksempelvis kroniske sår, hvor en steril bandage ikke er nødvendig. Ved at vælge curea clean BTBS sikres en væske- og bakterietæt barriere, der sikrer mod kontaminering udefra.

Størrelse	Størrelse på sugende midte	Pakkestørrelse	Artikelnr.
10 x 10 cm	7 x 7 cm	80	CCB-100100
10 x 20 cm	7 x 17 cm	40	CCB-100200
20 x 20 cm	17 x 17 cm	20	CCB-200200
20 x 30 cm	17 x 27 cm	20	CCB-200300

Hygiejne

Professionelle løsninger til sikring af høj hygiejnisk standard i såvel primær som sekundær sektor.



Produkter af høj kvalitet til effektiv håndtering af væsker (fx blod, urin, sekretion, skyllevæsker)



Klinisk hygiejne og beskyttelse mod kontaminering



Sikkert arbejdsmiljø for sundhedspersonalet



Forbedrede hygiejneforhold for patienter



Nem håndtering og let bortskaffelse som klinisk affald



Økonomiske fordele

curea Liquimat basic

curea Liquimat standard

curea Liquimat premium

curea Liquisorb

curea 150


curea SafeCare

curea Liquimat basic — skridsikker “ståmåtte” til sikker fodfæste for sundhedspersonalet



Karakteristika og fordele

-  Sikkert fodfæste for sundhedspersonalet
-  Ekstra stort format: 116 x 76 cm
-  Kan klippes til
-  Ekstra tynd
-  Skridsikker bagside
-  Håndterer op til 1,7 liter væske

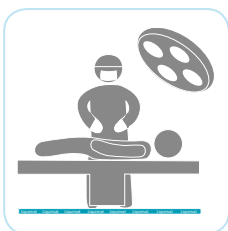

Anvendelsesområder

-  Alle operations- og undersøgelsesområder på sygehuse, eks. sengeafsnit og intensivafdelinger, ambulante afdelinger og brandsårsafdelinger
-  Plejehjem
-  Hospice
-  Lægepraksis
-  Hjemmepleje




Størrelse	Absorptionsareal	Pakkestørrelse	Artikelnr.
116 x 76 cm	116 x 76 cm	50 stk.	LMB11600760-622

curea Liquimat standard — højt absorberende “gulvmåtte”

Karakteristika og fordele

-  For klinisk hygiejne under operationsbordet
-  Absorption af blod, urin, sekretion, skyllevæske etc.
-  Sikker binding af bakterier i SuperCore®¹
-  Mål: 75 x 36 cm
-  Absorption fra begge sider
-  Håndterer op til 7 liter væske

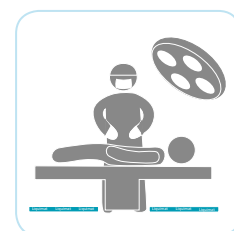

Gulvmåtte - ikke til at stå på!

SuperCore® er hurtigt absorberende, da den er fri for klæbe- og bindemidler.

Absorberer
fra begge sider.



Anvendelsesområder

-  Alle operations- og undersøgelsesområder på sygehuse, fx sengeafsnit og intensivafdelinger, ambulante afdelinger og brandsårsafdelinger
-  Plejehjem
-  Hospice
-  Lægepraksis
-  Hjemmepleje


Størrelse	Absorptionsareal	Pakkestørrelse	Artikelnr.
75 x 36 cm	68 x 30 cm	100 stk.	LMS07500360-623

curea Liquimat premium — højt absorberende “gulvmåtte”



Karakteristika og fordele

-  For klinisk hygiejne under operationsbordet
-  Absorption af blod, urin, sekretion, skyllevæske etc.
-  Sikker binding af bakterier i SuperCore®¹
-  Mål: 75 x 36 cm
-  Absorption fra begge sider
-  Håndterer op til 8,5 liter væske

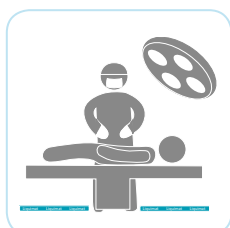

Gulvmåtte - ikke til at stå på!

SuperCore® er hurtigt absorberende, da den er fri for klæbe- og bindemidler.

Anvendelsesområder

-  Alle operations- og undersøgelsesområder på sygehuse, eks. sengeafsnit og intensivafdelinger, ambulante afdelinger og brandsårsafdelinger
-  Plejehjem
-  Hospice
-  Lægepraksis
-  Hjemmepleje



Absorberer fra begge sider.



Størrelse

75 x 36 cm

Absorptionsareal

68 x 30 cm

Pakkestørrelse

100 stk.



Artikelnr.

LMP07500360-624

curea Liquisorb — steril absorptionsmåtte til anvendelse på operationsbordet

Karakteristika og fordele

-  Væsker absorberes hurtigt og i store mængder (eks. blod, urin, sekretion)
-  Overfladen forbliver tør
-  Forebyggelse af kontaminering grundet sikker binding af bakterier¹
-  Mål: 60 x 38 cm
-  Steril
-  Individuelt pakket
-  Håndterer op til 8 liter væske

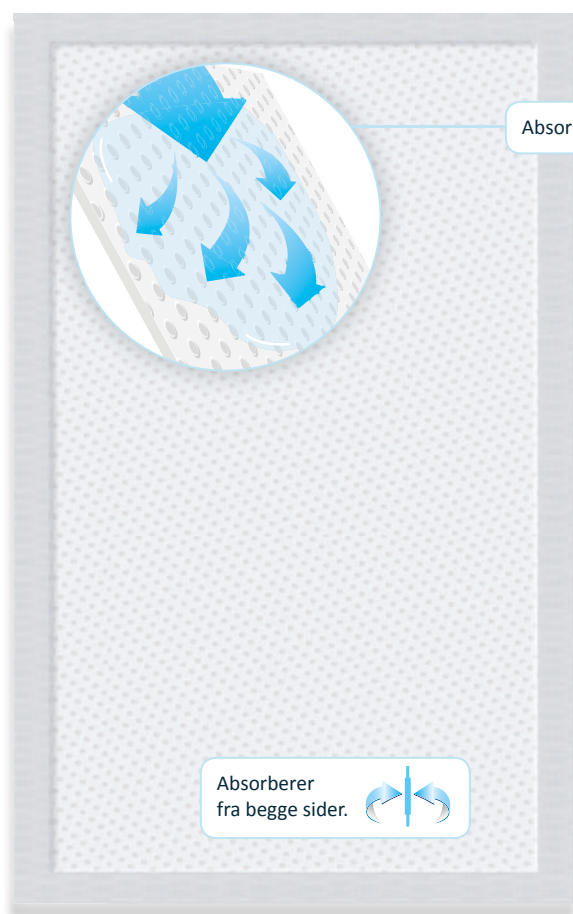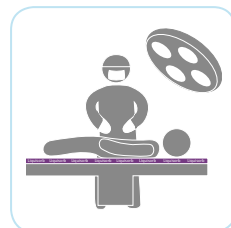

Absorberer i alle positioner

Absorberer fra begge sider.




Anvendelsesområder

-  Alle operations- og undersøgelsesområder på sygehuse, eks. sengeafsnit og intensivafdelinger, ambulante afdelinger og brandsårsafdelinger
-  Plejehjem
-  Hospice
-  Lægepraksis
-  Hjemmepleje

Størrelse	Absorptionsområde	Pakkestørrelse	Artikelnr.
60 x 38 cm	52 x 30 cm	50 stk.	LS06000380-625


curea 150 — ekstra stærkt og absorberende underlag til operationsborde og forflytninger

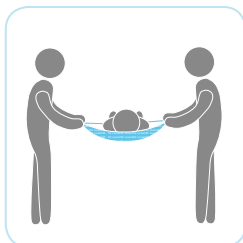

Speciel bagsidefilm nedsætter friktion og gør det nemt at forflytte patienten.

Karakteristika og fordele

-  Stort absorptionsområde (200 x 60 cm)
-  Pålidelig absorption og sikker retension af væsker og bakterier¹
-  Let håndtering ved patientforflytning og lejring
-  Åndbar, væske- og bakterietæt bagside
-  Hudvenlig og blød overside
-  Mål: 210 x 80 cm
-  Maksimal løftekapacitet 150 kg
-  Håndterer op til 10 liter væske

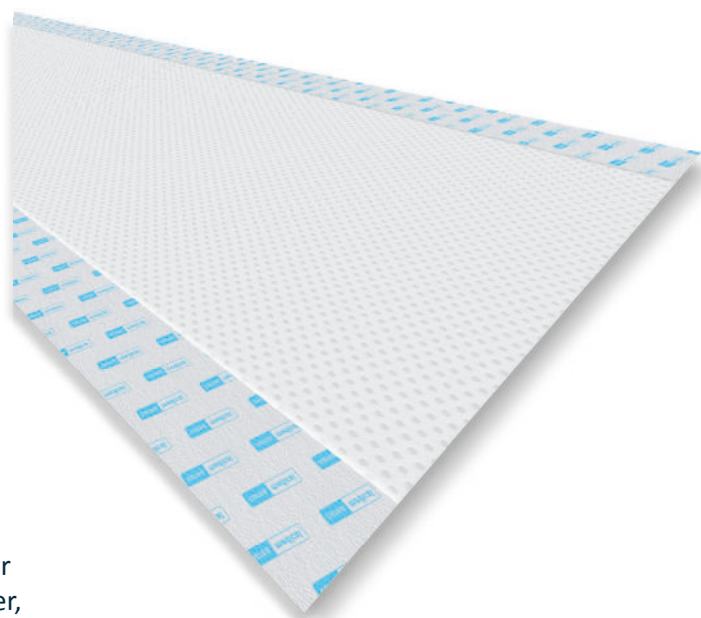

Anvendelsesområder

-  Alle operations- og undersøgelsesområder på sygehuse, eks. traumatologi, skadestuer, ortopædkirurgi, neurokirurgi, gynækologi, urologi
-  Redningstjenester, eks. ambulancer, luftredningstjenester

Størrelse	Absorptionsområde	Pakkestørrelse	Artikelnr.
210 x 80 cm	200 x 60 cm	20 stk.	c150-210x80

curea SafeCare — robust patientunderlag med SuperCore®

Karakteristika og fordele

-  Ensartet absorption og fordeling af væsker
-  Hygiejnisk og sikker grundet optimal håndtering af væsker (urin, blod)¹
-  Binding af bakterier og lugt
-  Et robust og stabilt underlag giver længere anvendelsestid
-  Hudvenlig og latexfri
-  Multifunktionel anvendelse: Madrasbeskytter, sengeunderlag, undersøgelsesunderlag osv.
-  Fås også med vinger i to sider, til at stikke ind under madrasser
-  Håndterer op til 4,2 liter væske




3 størrelser



Anvendelsesområder

-  Sygehus, lægepraksis, plejehjem og hospice etc.
-  Hjemmepleje

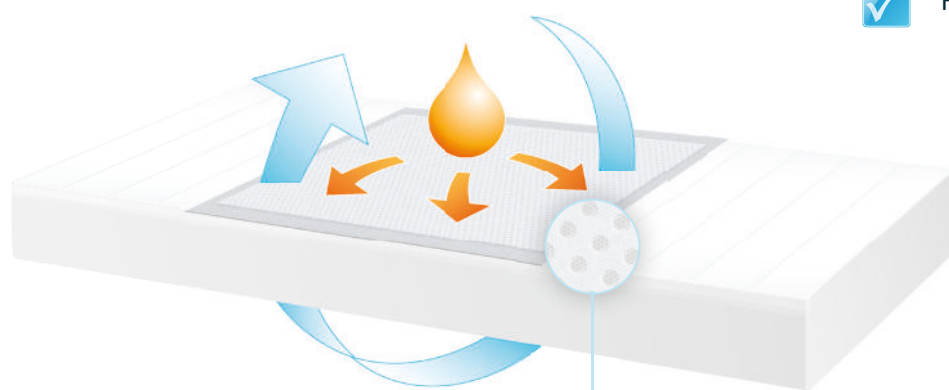


SuperCore® er hudvenlig, da den er fri for klæbe- og bindemidler.

Størrelse	Absorptionsområde	Produktvariant	Pakkestørrelse	Artikelnr.
60 x 60 cm	60 x 54 cm	åndbår ikke åndbar	112 stk. 112 stk.	SC-6060-BTBS SC-6060-PE
60 x 90 cm	60 x 80 cm	åndbår ikke åndbar	70 stk. 112 stk.	SC-9060-BTBS SC-9060-PE
60 x 180 cm	60 x 88 cm	åndbår; med vinger	56 stk.	SC-18060-BTBS

Dokumenteret sikker barriere mod bakterier

Oversigt over den mikrobielle validering af curea P1 og curea P2 på Medicinsk Center, Universitetet i Göttingen¹

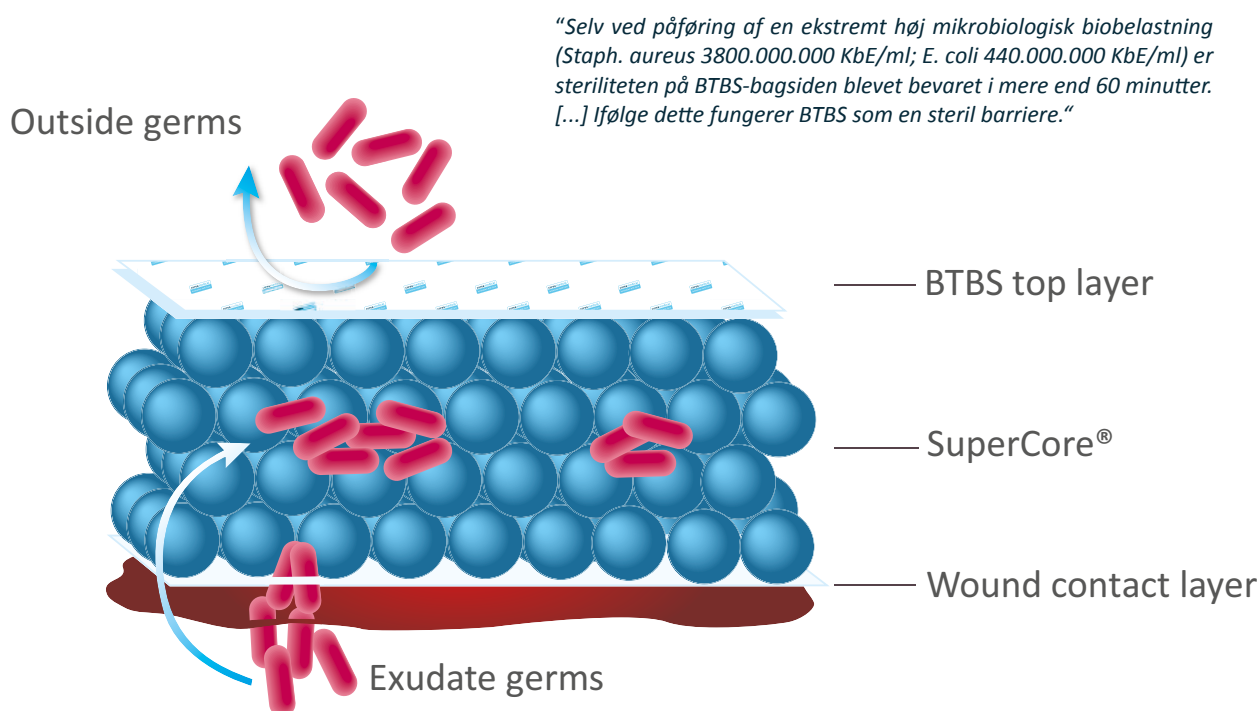


Fortolkning:

- ✓ Ingen bakterier kan passere BTBS bagsiden, hvorved kontaminering i begge retninger forebygges (= steril barriere)
- ✓ Bakterier, som anses for at være skyld i lugten, bliver bundet.
- ✓ Det, som bindes inde i SuperCore®, har ingen chance for at formere sig og vil blive udsultet.

Den fulde henvisning til ekspertrapporterne vises på sidste side i dette produktkatalog.

Dokumenteret sikker binding af blod

Opsummering af bestemmelsen af det resorberende potentiale i sårforbindingerne curea P1 og curea P2 i forbindelse med blod på Medicinsk Center, Universitetet i Göttingen²

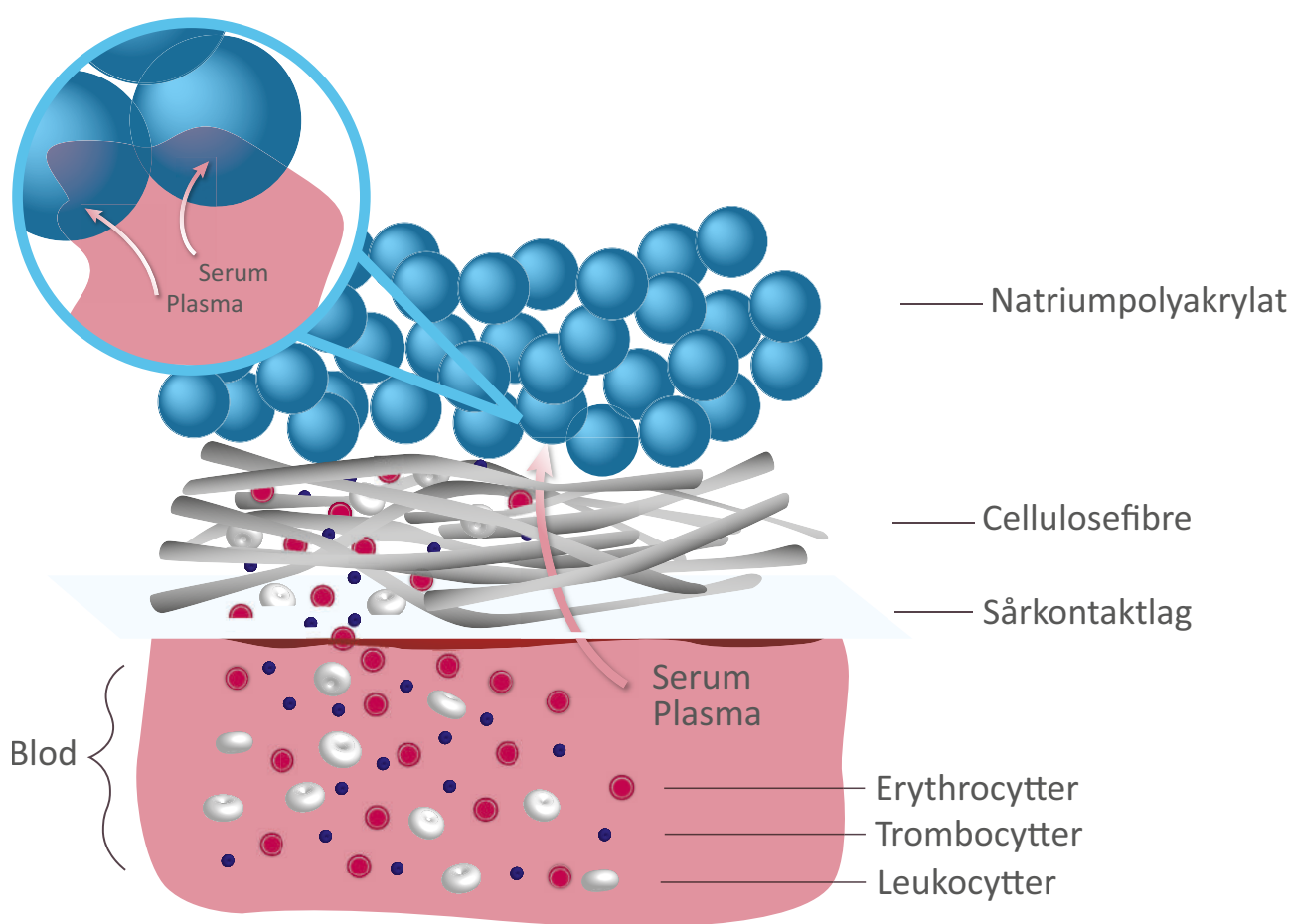

"I ingen af prøverne blev der observeret hæmolyse efter eksponering i 24 timer ved 36 °C."

"Resultaterne [...] viser, at i produkterne 'curea P1' og 'curea P2' sker en resorption af blod i forholdet 1:1."

Fortolkning:

- ☒ Blodet bindes fuldstændigt.
- ☒ Grove blodpartikler klæber sig til cellulosefibrene.
- ☒ Plasmaet absorberes i natriumpolyakrylatet.

Den fulde henvisning til ekspertrapporten vises på sidste side i dette produktkatalog.

Produktoversigt — Sårbehandling steril



Størrelse	Artikelnr.	Pakkestørrelse
5,5 x 7,5 cm	P1-055075-10	10 stk.
5,5 x 13 cm	P1-055130-10	10 stk.
7,5 x 7,5 cm	P1-075075-10	10 stk.
	P1-075075-25	25 stk.
	P1-075075-50	50 stk.
10 x 10 cm	P1-100100-5	5 stk.
	P1-100100-10	10 stk.
	P1-100100-25	25 stk.
	P1-100100-50	50 stk.
10 x 15 cm	P1-100150-10	10 stk.
10 x 20 cm	P1-100200-5	5 stk.
	P1-100200-10	10 stk.
	P1-100200-25	25 stk.
	P1-100200-50	50 stk.
10 x 30 cm	P1-100300-10	10 stk.
	P1-100300-25	25 stk.
	P1-100300-50	50 stk.
15 x 15 cm	P1-150150-10	10 stk.
	P1-150150-25	25 stk.
	P1-150150-50	50 stk.
20 x 20 cm	P1-200200-10	10 stk.
	P1-200200-25	25 stk.
	P1-200200-50	50 stk.
20 x 30 cm	P1-200300-10	10 stk.
	P1-200300-25	25 stk.
	P1-200300-50	50 stk.
25 x 40 cm	P1-250400-2	2 stk.
	P1-250400-10	10 stk.
40 x 60 cm	P1-400600-2	2 stk.
	P1-400600-10	10 stk.



Størrelse	Artikelnr.	Pakkestørrelse
5,5 cm x 25 cm	P1DUO-055250-10	10 stk.
7,5 x 7,5 cm	P1DUO-075075-10	10 stk.
	P1DUO-075075-25	25 stk.
10 x 10 cm	P1DUO-100100-10	10 stk.
	P1DUO-100100-25	25 stk.
10 x 20 cm	P1DUO-100200-10	10 stk.
	P1DUO-100200-25	25 stk.
20 x 20 cm	P1DUO-200200-10	10 stk.
	P1DUO-200200-25	25 stk.
20 x 30 cm	P1DUO-200300-10	10 stk.
	P1DUO-200300-25	25 stk.

Produktoversigt — Sårbehandling steril



Størrelse	Artikelnr.	Pakkestørrelse
10 x 10 cm	C1DUO-100100-10	10 stk.
10 x 20 cm	C1DUO-100200-10	10 stk.
20 x 20 cm	C1DUO-200200-10	10 stk.
20 x 30 cm*	C1DUO-200300-10	10 stk.

*Størrelse 20 x 30 cm kan fås fra Q2, 2019



Størrelse	Artikelnr.	Pakkestørrelse
12 x 12 cm	P1B-120120-10	10 stk.
16 x 16 cm	P1B-160160-10	10 stk.
15 x 25 cm	P1B-150250-10	10 stk.




Størrelse	Artikelnr.	Pakkestørrelse
11 x 11 cm	P1E-110110-10	10 stk.
10 x 20 cm	P1E-100200-10	10 stk.



Størrelse	Artikelnr.	Pakkestørrelse
12 x 12 cm	P1-100100D-5	5 stk.
	P1-100100D-25	25 stk.
	P1-100100D-50	50 stk.



Størrelse	Artikelnr.	Pakkestørrelse
20 x 30 cm	P1H-200300-5	5 stk.

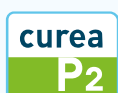

Størrelse	Artikelnr.	Pakkestørrelse
11 x 11 cm	P2-110110-5	5 stk.
	P2-110110-10	10 stk.
	P2-110110-25	25 stk.
10 x 20 cm	P2-100200-5	5 stk.
	P2-100200-10	10 stk.
	P2-100200-25	25 stk.

Produktoversigt — Sårbehandling steril



Størrelse	Artikelnr.	Pakkestørrelse
15 x 15 cm	P2-150150-10	10 stk.
	P2-150150-25	25 stk.
20 x 20 cm	P2-200200-10	10 stk.
	P2-200200-25	25 stk.
20 x 30 cm	P2-200300-10	10 stk.
	P2-200300-25	25 stk.
25 x 55 cm	P2-250550-2	2 stk.

Produktoversigt — Sårbehandling usteril



Størrelse	Artikelnr.	Pakkestørrelse
10 x 10 cm	CC-100100	100 stk.
10 x 20 cm	CC-100200	50 stk.
15 x 15 cm	CC-150150	50 stk.
20 x 20 cm	CC-200200	25 stk.
20 x 30 cm	CC-200300	25 stk.


BTBS

Størrelse	Artikelnr.	Pakkestørrelse
10 x 10 cm	CCB-100100	80 stk.
10 x 20 cm	CCB-100200	40 stk.
20 x 20 cm	CCB-200200	20 stk.
20 x 30 cm	CCB-200300	20 stk.

Produktoversigt — Hygiejne

curea liquimat

Størrelse	Artikelnr.	Pakkestørrelse
116 x 76 cm	LMB11600760-622	50 stk.
75 x 36 cm	LMS07500360-623	100 stk.
75 x 36 cm	LMP07500360-624	100 stk.

curea liquisorb

Størrelse	Artikelnr.	Pakkestørrelse
60 x 38 cm	LS06000380-625	50 stk.

curea 150

Størrelse	Artikelnr.	Pakkestørrelse
210 x 80 cm	OPTA210080010- CPBTBS-638	20 stk.



Størrelse	Artikelnr.	Pakkestørrelse
60 x 60 cm	SC-6060-BTBS	112 stk.
	SC-6060-PE	112 stk.
60 x 90 cm	SC-9060-BTBS	70 stk.
	SC-9060-PE	112 stk.
60 x 180 cm	SC-18060-BTBS (med vinger)	56 stk.

BTBS = åndbar
PE = ikke-åndbar

Producent:

curea medical GmbH
Münsterstraße 61-65
DE 48565 Steinfurt (Tyskland)

Telephone: +49 36071 9009500
Telefax: +49 36071 9009599

<http://www.curea-medical.de>
info@curea-medical.de

¹ Kilde: Ekspertrapport fra "Medicinsk Center, Universitetet i Göttingen", Afdeling for klinisk mikrobiologi, Akkrediteret analyselaboratorium og rådgivningsklinik, Humboldtallee 34A, D-37073 Göttingen | Dr. med. U. Schmelz: Mikrobiologisk validering af curea P1 den 1. marts 2011 eller af curea P2 den 25. maj 2011.

² Kilde: Ekspertrapport fra "Medicinsk Center, Universitetet i Göttingen", Afdeling for klinisk mikrobiologi, Akkrediteret analyselaboratorium og rådgivningsklinik, Humboldtallee 34A, D-37073 Göttingen | Dr. med. U. Schmelz: Bestemmelse af det resorberende potentiale i sårforbindingerne curea P1 og curea P2 i forbindelse med fuldblod, plasma, serum og fysiologisk saltopløsning, 30. marts 2012.

De fulde rapporter kan downloades på www.curea-medical.de eller rekvireres pr. e-mail på info@curea-medical.de og pr. telefon på +49 36071 9009500.

SuperCore®: Patentet tilhører moderselskabet til curea medical GmbH, McAiraid's Vliesstoffe GmbH, Tyskland

HekaFix Comfort er et produkt tilhørende vores hollandske partner Van Heek Medical, Macroweg 10, 5804 CL Venray, Holland.

Kildeangivelse på billederne: © curea medical GmbH; Frontpicture: Apodan A/S

Ansvarsfraskrivelse:

På trods af grundig omhu kan udgiveren ikke drages til ansvar for nøjagtigheden. Vi påtager os ikke noget ansvar for oplysninger om indikationer og anvendelsesområder. Ændringer kan forekomme.

Beskyttede navne (varemærker) er ikke specielt markeret. Fraværet af sådanne markeringer må ikke tolkes som værende ensbetydende med, at et varemærke ikke er registreret. Dette produktkatalog og alt dets indhold er beskyttet ved lov. Alle rettigheder forbeholdes, især genoptryk (også af illustrationer), alle reproduktioner, foredrag, radioudsendelser, optagelser og tv-udsendelser såvel som lagring i databehandlingssystemer, også som uddrag og oversættelser. Enhver brug ud over de stramme grænser i ophavsretslovgivning uden tilladelse fra Apodan A/S er strengt forbudt og straffes ved lov.

© 2019 Apodan A/S



Lyngsø Alle 3 | DK-2970 Hørsholm
Tlf.: 32 97 15 25 | info@apodan.dk | www.apodan.dk