Apodan



PolyMem sårbandage
En guide til fodterapeuten

Hurtig heling - Lindrer smerter

PolyMem®


Denne pjece er til dig der, som fodterapeut, behandler diabetiske fodsår

Formålet med pjecen er, at give dig viden om PolyMem sårbandage, så du kan anvende bandagen hensigtsmæssig og får optimalt udbytte af den.

Pjecen indeholder vigtig viden om PolyMem sårbandage, bandagens opbygning og virkemekanismer, information om sortiment for korrekt bandagevalg, samt tips og tricks til anvendelse, bandagering og fiksering.

Hvad er PolyMem Sårbandage?

PolyMem er en aktiv bandage, som fremmer sårheling, forebygger infektion og lindrer smerter.
Bandagen renser såret kontinuerligt, løsner og fjerner urenheder og bakterier, og reducerer ødem i og omkring såret.

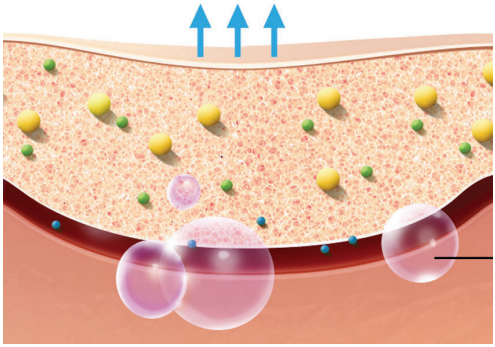

Sårrenser Fugter Super-absorbanter

Unikke komponenter med unik effekt

Renser: Surfaktant er et mildt overfladeaktivt stof, som sikrer kontinuerlig rensning af såret. Den løsner fibrin, debris, nekrose og bakterier fra sårbunden, så dette er nemmere at fjerne ved manuel oprensning. Surfaktanten frigives når bandagen bliver fugtig, og sikrer kontinuerlig oprensning indtil næste bandageskift.

Blødgør og fugter: Glycerin er hudplejende, og er medvirkende til at opretholde et optimalt fugtigt sårmiljø. Frigives når bandagen bliver fugtig og sikrer at bandagen kan fjernes atraumatisk.

Absorberer: Når polyuretan matrix bliver fugtig, udvides den og former sig efter sårbunden. Sammen med superabsorbant sikres høj væskehåndtering, binding af væske, urenheder og bakterier i bandagen, samt reduktion af risiko for lækage.

Beskytter: Den åndbare film er en del af bandagens væskehåndtering, ligesom den beskytter mod forurening udefra. Man kan se sårsekret på bagsiden, hvilket kan bruges som indikator for skift af bandagen.

Lindrer smerter: Den unikke konstruktion af bandagen modulerer den inflammation, der er i såret og vævet omkring såret, ligesom den reducerer aktiviteten af de frie nerveender i vævet. Derved mindskes smerteintensiteten.

Hvilke sår kan PolyMem anvendes til?

PolyMem kan anvendes til de fleste sår, herunder diabetiske fodsår.

Sortiment


PolyMem findes i mange forskellige udgaver, og ens for alle bandager er, at de indeholder de samme 5 aktive komponenter og virker på samme måde.

En undtagelse er dog PolyMem WIC, der er en kavitetsbandage. Denne har ikke en filmbagside, og kræver derfor en sekundær bandage, f.eks. PolyMem Standard eller PolyMem MAX alt efter sekretionsniveau.


Det er muligt at klippe i PolyMem sårbandager.
De nævnte bandager er alle uden klæbekant og skal fikseres.

Sekretionsniveau

PolyMem Standard
Let til moderat væskende sår.

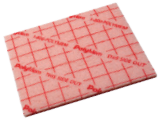

PolyMem MAX:
Moderat til kraftigt væskende sår.

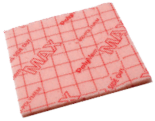


PolyMem Finger/tå bandage:
Tubular bandage (PolyMem Standard), der er lukket i den ene ende. Anvendes til bandagering af fingre og tæer.



PolyMem WIC:
Kavitetsbandage. Kan også anvendes som sårkontaktlag ved ønske om øget væskehåndtering.



PolyMem Silver:
Alle PolyMem bandager findes også i en udgave med sølv for antimikrobiel effekt. Sølvpartiklerne bliver i bandagen, og frigives ikke til vævet. Når bandagen bliver fugtig, frigives sølv-ioner som virker antimikrobielle.



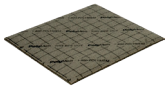


For at sikre optimal effekt af PolyMem, må der ikke lægges andre produkter under PolyMem. Sørg for at PolyMem altid har direkte kontakt med sårbund, sårkanter og hud.

Godt at vide ved bandagevalg

For at sikre optimal behandling og et hensigtsmæssigt skifteinterval, er det vigtigt at vælge den korrekte bandage til det enkelte sår, og her bør man gøre sig nogle overvejelser inden:

- Hvor er såret lokaliseret
- Hvor meget væsker såret
- Er der infektion
- Er såret belagt med fibrin/nekrose
- Hvor ofte skal såret tilses og vurderes
- Hvor hyppigt skal bandagen skiftes

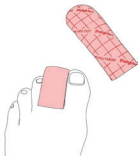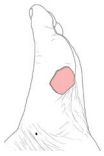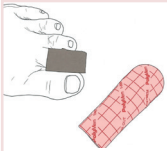
Sår på tå		Vælg en PolyMem tåbandage. Det er vigtigt at anvende den rette størrelse. Bandagen skal sidde til uden at stramme. Anvend størrelsesindikatoren på pakken.
Sår på fod		Vælg en PolyMem Standard eller PolyMem Max alt efter sekretionsniveau og ønsket skifteinterval. Skal fikseres.
Sår ved grundled		Vælg en PolyMem tåbandage. Klip toppen af bandagen og del den ved svejsningerne i siden. Træk bandagen ned over tåen og dæk såret ved grundleddet. Husk ! Ved lille- og storetå åbnes kun i den ene side.
Væskende sår		Væsker såret meget, kan man anvende PolyMem WIC som sårkontaktlag og derved øge væskehåndteringen. Vælg da en PolyMem Tåbandage en størrelse større.
Dybe sår		Er såret dybere end ½ cm, skal der lægges en PolyMem WIC i kaviteten. Denne klippes til, så den fylder ca. 2/3 af kaviteten. Vælg passende sekundær bandage.
Inficeret sår		Er såret infektiøst, eller er der høj risiko for infektion, bør man vælge PolyMem WIC Silver for antimikrobiel effekt. Øvrig behandling af infektion skal foregå efter den lokale instruks. (Antibiotika, sårsoignering mm).

Debridering og sårsoignering

For at fremme opheling af såret, er det vigtigt at fjerne nekroser, fibrin og andre belægninger. Når der er et fugtigt sårmiljø, vil kroppens immunforsvar selv gøre dette, men er der et kronisk sår, vil denne evne ofte være reduceret bl.a. på grund af en uhensigtsmæssig kronisk inflammation.
PolyMem fremmer oprensning af såret, idet nekroser, fibrin og andre belægninger løsnes og absorberes i bandagen.


Rens og soignér såret efter den lokale instruks.

Anvendelse af tå-bandagen:

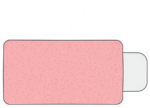

1.

Bandagen vender med indersiden udad når du åbner pakken.

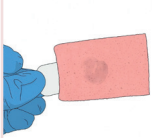


2.

Der sidder en plastiksplit i bandagen.
Denne fjernes før applicering.




3.

For at lette applicering kan man klippe/rive i svejsningerne i begge sider, og derved få et godt greb.

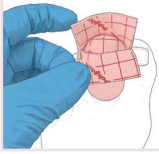

4.

Sæt den åbne ende mod tåen og træk bandagen op over tåen.
Den skal trækkes helt op til tåspidsen - og sidde godt til.

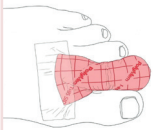

5.

Åben evt. mere i svejsningerne så der ikke skabes tryk mellem tæerne.
Fikseres med tape ell. lign.
Man kan også klippe overskydende bandage af og fiksere med elastisk tape eller selvhæftende bandage rund i kanten.

Der bør ikke lægges anden forbinding udenpå PolyMem.

Fiksering af PolyMem sårbandage:

Anvendes klæbende fiksering, må denne kun sættes i kanten.

Bandagens åndbare filmbagside er en del af bandagens væskehåndtering, idet fugt fordamper ud gennem filmen. Hvis filmen dækkes helt af en klæbende fiksering, nedsættes bandagens åndbarhed og dette kan skade såret, ligesom behov for bandageskift øges.

Tåler huden ikke klæb, kan bandagen fikseres med en elastisk tubegaze eller selvhæftende fikseringsbind.

Skiftefrekvens:

PolyMem er aktiv i op til 7 dage, og kan ligge på såret i op til 7 dage.
Dette afhænger dog af sekretion, sårets tilstand og behov for tilsyn.


Bandagen skal skiftes straks, hvis den er blevet våd.


Bandagen renser såret og reducerer hævelse i vævet, hvorfor det er normalt at såret væsker mere de første dage. Derfor må det forventes at bandagen skal skiftes hyppigere i starten af behandlingen for at undgå maceration af hudomgivelser og/eller lækage.

1. bandageskift skal ske efter 2-3 dage. Derefter kan man øge skifteintervallet.

Ved infektion øges skifteintervallet behørigt.


OBS
Det er vigtigt at aflaste såret og skåne bandagen.
PolyMem tåler ikke at man går på den

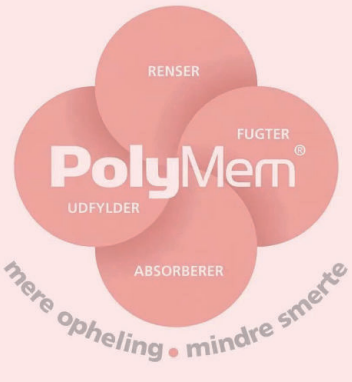

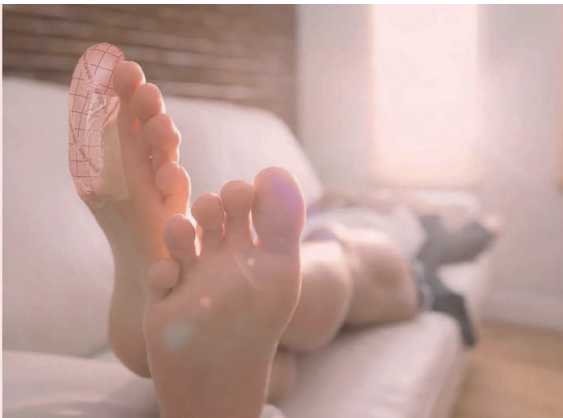

Størrelsesguide

Det er meget vigtigt at vælge den rette størrelse.
Bandagen skal sidde til uden at stramme!

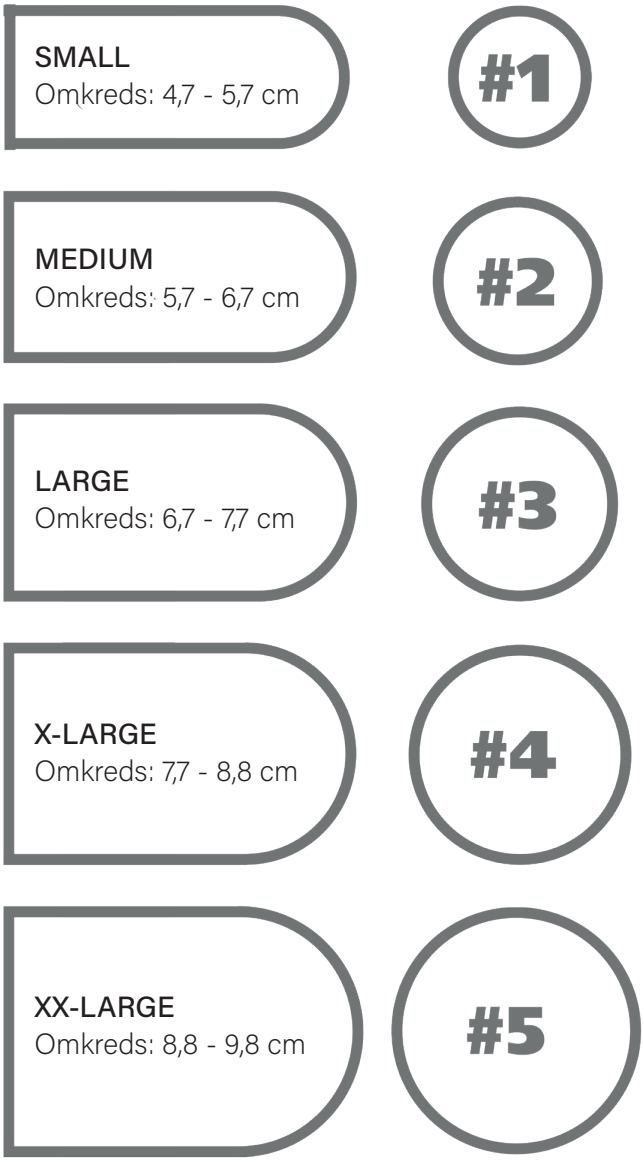

Anbefalet sortiment

Vare nr.	Varebeskrivelse	Antal/æske
4401	PolyMem finger/tå #1, S	6 stk.
4402	PolyMem finger/tå #2, M	6 stk.
4403	PolyMem finger/tå #3, L	6 stk.
4404	PolyMem finger/tå #4, XL	6 stk.
4405	PolyMem finger/tå #5, XXL	6 stk.
5731	PolyMem WIC, 2,5x7,6 cm	14 stk.
5733	PolyMem WIC, 8x8 cm	10 stk.
1331	PolyMem WIC Silver, 2,5x7,6 cm	14 stk.
1333	PolyMem WIC Silver, 8x8 cm	10 stk.
5033	PolyMem Standard, 8x8 cm	15 stk.
5035	PolyMem MAX, 7,6x7,6 cm	10 stk.

Anvendes efter anvisning af sundhedspersonale.
Sterile og enkeltpakkede. CE-mærket klasse 2b
Holdbar 5 år efter produktionsdato

Læs endvidere brugsvejledningen i pakken.

Læs mere om PolyMem tåbandage

Se video om bandagering med PolyMem tåbandage

Apodan

Tlf.: 32 97 15 25 | info@apodan.dk | www.apodan.dk

Apodan anvender FSC®, ECF og European Ecolabel godkendt papir.

10/26