

Hvordan anvendes Spycra Protect


1. Rens huden/såret grundigt, og tør huden omhyggeligt.
2. Vælg en forbindelse, der går ca. 2 cm ud over sårkant / hudområde. For at sikre en god tilhæftning, anbefales det, at anvende én stor forbindelse frem for at sammensætte/overlappe flere små forbindelser.
3. Vend Spycra Protect med bagsiden opad. Det anbefales, at strække forbindingen forsigtigt, for bedre at kunne få fat i perforeringen på bagsiden. Skub forsigtigt beskyttelsespapiret af, ved at folde forbindingen. Fugtede handsker forhindrer handskerne i at klæbe til forbindingen.
4. Løsn beskyttelsespapiret fra forbindingen indtil der er ca. 1-2 cm, der stadig sidder på forbindingen.
5. Anbring Spycra Protect på såret eller på den hud, der skal beskyttes, og sæt forsigtig forbindingen på plads. Sørg for, at den sidder godt og tæt på huden. Fjern beskyttelsespapiret helt.
6. Sørg for, at Spycra Protect er anbragt i ikke-strakt tilstand. Hvis det er nødvendigt kan hele eller dele af forbindingen løsnes og påsættes igen.

Læs endvidere indlægssedlen i pakningen før brug.

Spycra Protect, steril

Vare nr.	Størrelse	Antal/æske
SDSC-575	5 x 7,5 cm	10 stk
SDSC-7510	7,5 x 10 cm	10 stk
SDSC-1018	10 x 18 cm	5 stk
SDSC-1830	18 x 30 cm	3 stk
SDSC-5150	5 x 150 cm	1 stk

Enkeltpakket og steril. Medicinsk udstyr, klasse 2b.
Opbevares tørt, ved stuetemperatur og udenfor direkte sollys.
Holdbarhed 5 år efter produktionsdato.

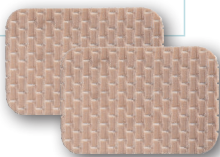

01/19



Producent:
Reskin Medical N.V.
+32 (0)13 35 36 24
info@reskin.eu



Lyngsø Alle 3 | DK-2970 Hørsholm
Tlf.: 32 97 15 25 | info@apodan.dk | www.apodan.dk

Spycra Protect®

BESKYTTELSE MOD FRIKTION



Til beskyttelse mod friktion, til små sår og vabler hos børn og voksne med **Epidermolysis Bullosa**

SPYCRA® Protect

Hvad er Spycra Protect

Spycra Protect er en forbindelse, hvor en glat, åndbar og bi-elastisk bagside er kombineret med en blød silikone klæber.

Forbindingen kan strække sig i 2 retninger, hvilket bevirker at friktion forårsaget af bevægelse, bliver afværget af forbindingen. Dette beskytter huden mod de shear-krafter, der kan forårsage vabler og sår.

Er det nødvendigt med en forbindelse under Spycra Protect?

Nej, forbindingen kan placeres direkte på intakt hud, små sår og vabler.

Er det nødvendigt med en forbindelse over Spycra Protect?

Anvendes forbindingen til at beskytte skrøbelig og udsat hud, eller over små sår og vabler, kan Spycra Protect anvendes alene.

Hvis såret væsker meget, anbefales det ikke at anvende Spycra Protect.

Klæber forbindelse til huden, når den skal fjernes?

Silikone-klæber er meget skånsom, men føles det som om forbindingen sidder for fast på huden eller trækker i huden, anbefales det at bruge en silikone-klæbefjerner til at fjerne forbindingen med.

Kan jeg klippe i forbindingen?

Ja, det er muligt, at klippe i forbindingen med en skarp saks. Dette bør gøres før beskyttelsespapiret fjernes.

Hvor længe kan forbindingen sidde på?


Hvis forbindingen anvendes over et lille sår eller vabel anbefales det, at skifte forbindingen dagligt. Tillader såret det, er det muligt at skifte med 2-3 dages interval.

Anvendes forbindingen på intakt hud, for at beskytte mod friktion, kan den forblive på i op til en uge.

Læs endvidere indlægssedlen for yderligere information om korrekt brug.

Jeg er allergisk over for silikone – kan jeg anvende Spycra Protect?

Nej, dette anbefales ikke. Klæberen er en medicinsk silikone, der tåles af langt de fleste, men har man en kendt allergi over for silikone, bør man ikke anvende produktet.

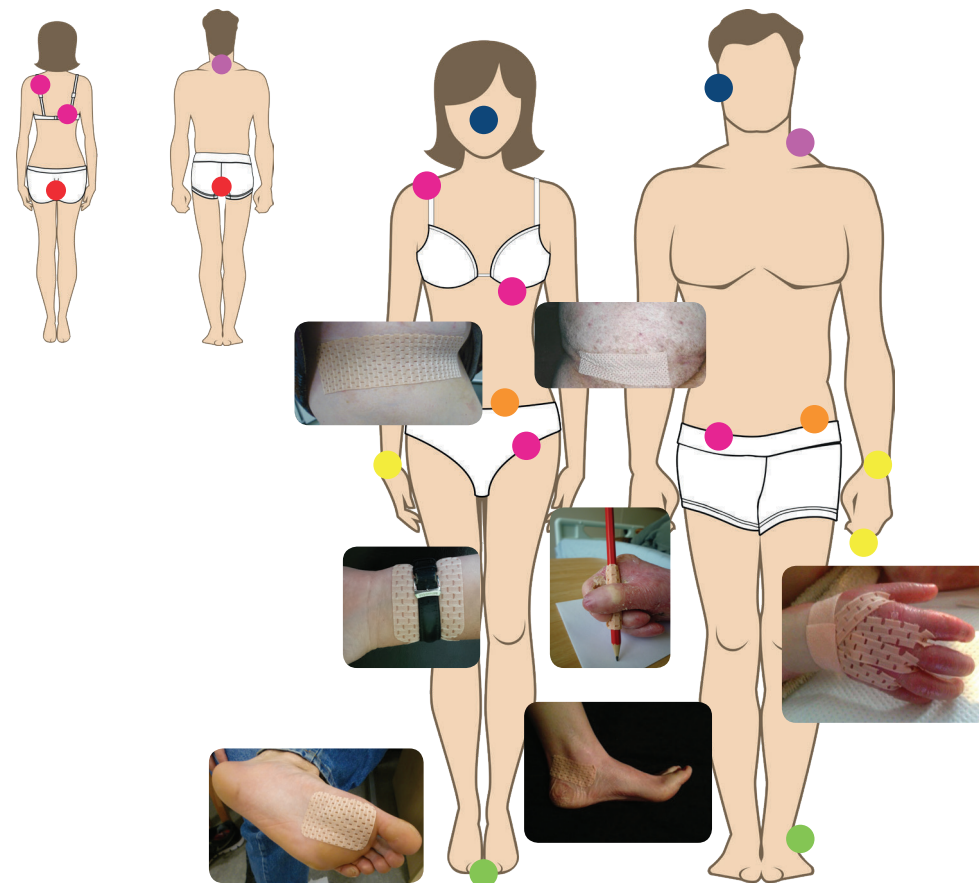

Forslag til brug af Spycra Protect:

- Over små vabler og sår
- Som beskyttelse over helede sår
- Som beskyttelse ved brug af briller – over næseryg og bag ørerne
- Under skulderstraps ved BH, under brystet
- Ved linding/kanter ved undertøj
- Under eller rundt om kraver
- Under armbåndsår
- Mellem fingre ved Dystrofisk EB for at forebygge sammenvoksning
- Rundt om fingre, når der holdes på en blyant
- Under ringe
- På bagdelen - på siddeflader
- I hudfolder
- På steder med friktion, såsom fødder, ved EB Simplex
- Rundt om hæle, fodballer
- Spycra Protect kan også anvendes på forskellige ting, såsom glas og blyanter