

# LymphaPress®

## LymphaPod Byxmanschett



### LymphaPod Byxmanschett

Lympha Press är det enda intermittenta kompressionssystemet som även har kompressionsmanschetter till personer som väger mellan 150–300+ kg.


LymphaPod täcker hela underkroppen med sina 40 överlappande luftkamrar.

LymphaPod har två separata byxben inuti manschetten, som vid behov kan regleras i grenhöjd, t ex vid överhäng av mage och/eller lår.

LymphaPod är ergonomiskt designad till stora personer med begränsad rörlighet.

*LymphaPod kan **endast** användas med Lympha Press Optimal och senare modeller.*

*Preterapiprogrammet rekommenderas inte när man använder LymphaPodmanschetten.*

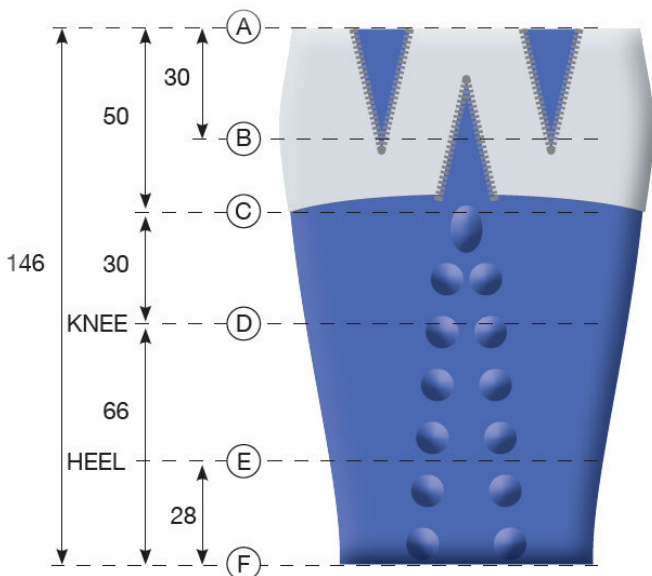

Teckning av LymphaPod manschett i sin helhet med referenspunkter. Mätning bör göras av båda benen.

Varunr.	Namn	LymphaPod Byxmanschett, mått i cm					
		A (midja)	B (höft)	C (lår)	D (knä)	E (ankel)	F (omkrets vid fotändan)
		Max	Max	Max	Max	Max	Max
022181	LymphaPod Byxmanschett med slangutgång på höger sida	206	212	130	125	104	87
022179	LymphaPod Byxmanschett med slangutgång på vänster sida	206	212	130	125	104	87
-	LymphaPod med 1 kil i den ena sidan	222	227	143	138	114	95
-	LymphaPod med 1 kil i varja sida	238	242	143	138	114	95
022177	Extensionskil till högra sidan av LymphaPod manschetten						
022176	Extensionskil till vänstra sidan av LymphaPod manschetten						

För mer information kontakta:  
Tlf.: +45 32 97 15 25 | [www.lymphapress.se](http://www.lymphapress.se) | [info@apodan.dk](mailto:info@apodan.dk)

# Mätpunkter på kroppen inför val och storlek av manschett

**Mätpunkter på kroppen - Mät med måttband, men dra inte åt så att huden trycks in!**

Till överkroppsmanschetter	Armmanschett	Comfy arm	Jackmanschett
Omkrets underarm, bredaste stället	x	x	x
Omkrets armbåge, med sträckt arm	x	x	x
Omkrets överarm, bredaste stället	x	x	x
Omkrets bål i brösthöjd		x	x
Omkrets midja (mellan revben och höftben)		x	x
Armlängd, sträckt arm (från långfingerspets till armhåla)	x	x	x
Ange höger eller vänster sida		x	



Armmanschett



Comfy Armmanschett



Jackmanschett

Till underkroppsmanschetter	Benmanschetter, alla	Byxmanschetter och LymphaPod
Omkrets ankel	x	x
Omkrets vad, bredaste stället	x	x
Omkrets knä, med sträckt ben	x	x
Omkrets lår, bredaste stället	x	x
Omkrets höft, bredaste stället		x
Omkrets midja		x
Benlängd medialt (mät på insidan av benet från golv till gren)	x	x



Benmanschett med karborrband och fyra luftkammare i foten



Comfy Benmanschett med blixtlås och en luftkammare i foten



Byxmanschett Standard eller XL



LymphaPod Byxmanschett

## Val av manschettstorlek

När pumpen fyller manschetten med luft, kommer luftintaget att anpassa kompressionen efter kroppskonturen. Välj därför en större manschettstorlek än kroppsmåtten.

Tänk på att när luften fylls i benmanschettens luftkammare under foten, så kommer manschetten att dras något nedåt (i perifer riktning). Därför rekommenderar vi att man väljer en benmanschett som är cirka 10 cm längre än personens benlängd.