

# LymphaPress®

## Byxmanschett




Fotens vinkel regleras med hjälp av "hajfenor" som sitter vid vristen.

### Lympha Press Byxmanschett i flera storlekar

Byxmanschetterna Standard och XL används till personer med ödem i ena eller båda benen där höftpartiet och magregionen behöver behandling. För att underlätta på- och avtagande av manschetterna, leveras de nu med slangutgång vid anklarna.

Storleken regleras med hjälp av tre dragkedjor som är placerade längst med utsidan på vardera byxben. Storleken kan ytterligare regleras med hjälp av kilar som kopplas till dragkedjorna i sidorna av byxbenen. Byxmanschetten har 24 överlappande luftkamarer.

Det finns även en Byxmanschett för personer med obesitas, Lympha Pod.

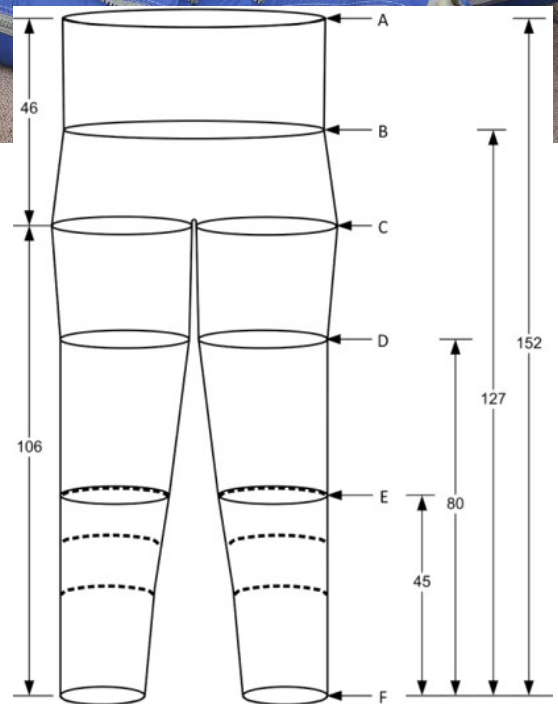

Referenspunkter till måttabell

### Måttabell till Byxmanschett standard och XL (cm)

Varunr.	Navn	Maximal manschettdimension (cm)					
		A ( midja)	B (höft)	C (lår)	D (knä)	E (ankell)	F (omkrets vid fotfändan)
022066	Byxmanschett Standard med slangutgång vid fot	135	134	72	66	58	45
-	Byxmanschett Standard med 1 par kilar	144	154	82	75	65	50
-	Byxmanschett Standard med 2 par kilar	152	168	92	84	72	55
022074	Byxmanschett XL med slangutgång vid fot	170	164	85	82	76	60
-	Byxmanschett XL med 1 par kilar	179	184	95	92	83	65
-	Byxmanschett XL med 2 par kilar	186	201	100	102	100	70
022007	Kilar till Byxmanschett (höger och vänster)						

För mer information kontakta:  
Tlf.: +45 32 97 15 25 | [www.lymphapress.se](http://www.lymphapress.se) | [info@apodan.dk](mailto:info@apodan.dk)

# Mätpunkter på kroppen inför val och storlek av manschett

**Mätpunkter på kroppen - Mät med måttband, men dra inte åt så att huden trycks in!**

Till överkroppsmanschetter	Armmanschett	Comfy arm	Jackmanschett
Omkrets underarm, bredaste stället	x	x	x
Omkrets armbåge, med sträckt arm	x	x	x
Omkrets överarm, bredaste stället	x	x	x
Omkrets bål i brösthöjd		x	x
Omkrets midja (mellan revben och höftben)		x	x
Armlängd, sträckt arm (från långfingerspets till armhåla)	x	x	x
Ange höger eller vänster sida		x	



Armmanschett



Comfy Armmanschett



Jackmanschett

Till underkroppsmanschetter	Benmanschetter, alla	Byxmanschetter och LymphaPod
Omkrets ankel	x	x
Omkrets vad, bredaste stället	x	x
Omkrets knä, med sträckt ben	x	x
Omkrets lår, bredaste stället	x	x
Omkrets höft, bredaste stället		x
Omkrets midja		x
Benlängd medialt (mät på insidan av benet från golv till gren)	x	x



Benmanschett med karborrband och fyra luftkammare i foten



Comfy Benmanschett med blixtlås och en luftkammare i foten



Byxmanschett Standard eller XL



LymphaPod Byxmanschett

## Val av manschettstorlek

När pumpen fyller manschetten med luft, kommer luftintaget att anpassa kompressionen efter kroppskonturen. Välj därför en större manschettstorlek än kroppsmåtten.

Tänk på att när luften fylls i benmanschettens luftkammare under foten, så kommer manschetten att dras något nedåt (i perifer riktning). Därför rekommenderar vi att man väljer en benmanschett som är cirka 10 cm längre än personens benlängd.