

LymphaPress®

Lympha Press Comfy Benmanschett




Lympha Press Comfy Benmanschett

Benmanschetterna är tillägnade personer som har ödem i ett ben eller ödem i båda benen utan att centrala delar av kroppen är involverade.

Benmanschetten inkluderar fot och har 12 överlappande luftkamrar, varav 2 är i fotdelen.

Manschetten med blixtlåsförslutning kan inte individanpassas som den med kardborreförslutning. Omkretsen kan ökas med hjälp av kilar.

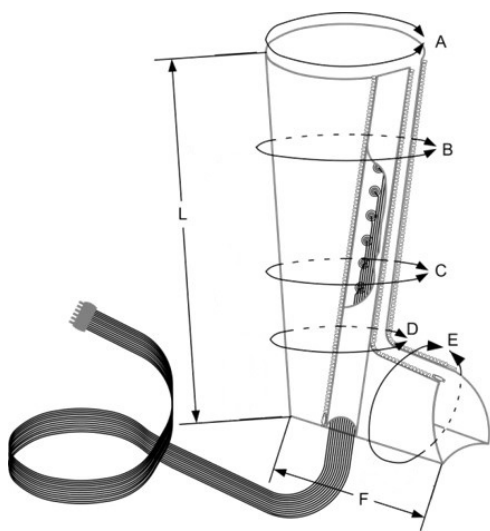


Asymmetrisk
(vadderad)
kil
10 cm



4 cm

Rektangulär
(icke vadderad)
kil
10 cm

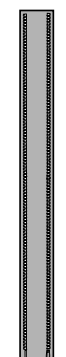

10 cm

Comfy Benmanschett		Manschettmått (cm)							Mått med asymmetrisk kil (cm)					Rektangulär kil (cm)*	
Varunr.	Storlek	A	B	C	D	E	F	L	Varunr.	A	B	C	D	E	Varunr.
022195	2-75 S+	66	56	46	43	48	26	75	022137	76	66	56	48	52	022141
022189	2-85 M	70	60	47	42	48	26	84	022138	80	70	56	49	52	022142
022190	2-95 M+	78	68	51	43	48	26	95	022140	90	82	60	49	52	022144
022191	3-65 L	81	73	60	56	54	37	65	022137	91	83	70	59	60	022141
022192	3-75 L+	85	76	61	56	54	37	75	022138	95	86	71	59	60	022142
022193	3-85 L++	90	80	63	56	54	37	85	022139	100	90	73	59	60	022143
022194	4-75 WL+	94	79	64	64	58	41	75	022138	104	89	73	68	59	022142

*) Vid användning av den rektangulära extensionskilen, ökar manschettmättet A – E (i det blå område) med 10 cm.

Mätpunkter på kroppen inför val och storlek av manschett

Mätpunkter på kroppen - Mät med måttband, men dra inte åt så att huden trycks in!

Till överkroppsmanschetter	Armmanschett	Comfy arm	Jackmanschett
Omkrets underarm, bredaste stället	x	x	x
Omkrets armbåge, med sträckt arm	x	x	x
Omkrets överarm, bredaste stället	x	x	x
Omkrets bål i brösthöjd		x	x
Omkrets midja (mellan revben och höftben)		x	x
Armlängd, sträckt arm (från långfingerspets till armhåla)	x	x	x
Ange höger eller vänster sida		x	



Armmanschett



Comfy Armmanschett



Jackmanschett

Till underkroppsmanschetter	Benmanschetter, alla	Byxmanschetter och LymphaPod
Omkrets ankel	x	x
Omkrets vad, bredaste stället	x	x
Omkrets knä, med sträckt ben	x	x
Omkrets lår, bredaste stället	x	x
Omkrets höft, bredaste stället		x
Omkrets midja		x
Benlängd medialt (mät på insidan av benet från golv till gren)	x	x



Benmanschett med karborrband och fyra luftkammare i foten



Comfy Benmanschett med blixtlås och en luftkammare i foten



Byxmanschett Standard eller XL



LymphaPod Byxmanschett

Val av manschettstorlek

När pumpen fyller manschetten med luft, kommer luftintaget att anpassa kompressionen efter kroppskonturen. Välj därför en större manschettstorlek än kroppsmåtten.

Tänk på att när luften fylls i benmanschettens luftkammare under foten, så kommer manschetten att dras något nedåt (i perifer riktning). Därför rekommenderar vi att man väljer en benmanschett som är cirka 10 cm längre än personens benlängd.